


Акупунктурный электромаasseur для ухода за телом «Исюэтун»



ru.tiens.com

Способы использования массажера Исюэтун

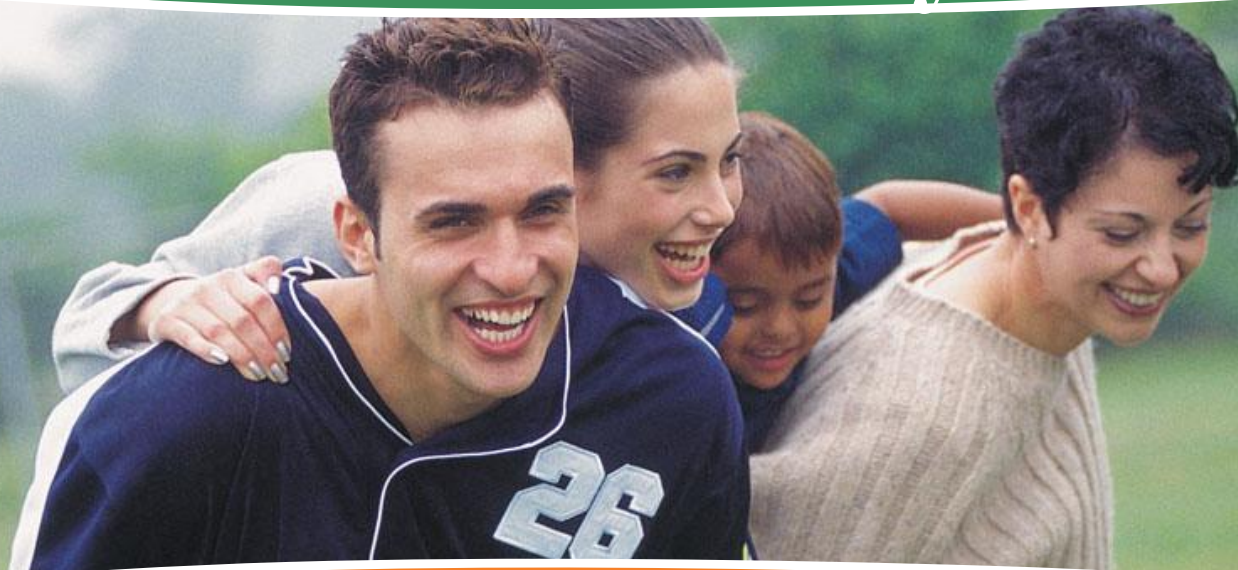

Связь каналов «цзинло» и заболеваний




Пропроходимость

При нормальной проходимости каналов заболевания не появляются, возникновение болезни означает наличие низкой проходимости каналов.



Что такое каналы «цзинло»?

В китайской традиционной медицине термин «цзинло» включает в себя понятия «цзинмай» (каналы) и «ломай» (коллатеральные сосуды). Каналы «цзинло» представляют собой сеть транзитных дорог, по которым циркулирует жизненная энергия в теле человека (энергия и кровь), которые сообщают между собой все внутренние органы, пронизывают организм снаружи и изнутри, с головы до ног.

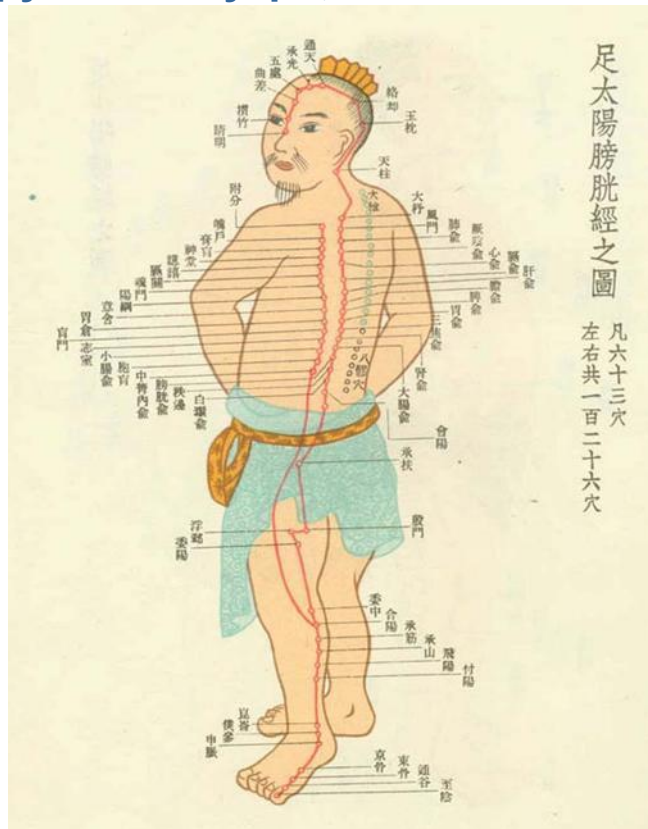

12 меридианов

- ❖ 3 меридиана Инь на руке: верхний – меридиан легких, средний – меридиан перикарда, нижний – меридиан сердца
- ❖ 3 меридиана Ян на руке: верхний – меридиан толстой кишки, средний – меридиан «саньцзяо», нижний – меридиан тонкого кишечника
- ❖ 3 меридиана Инь на ноге: передний – меридиан селезенки, средний – меридиан печени, задний – меридиан почек
- ❖ 3 меридиана Ян на ноге: передний – меридиан желудка, средний – меридиан желчного пузыря, задний – меридиан мочевого пузыря



Часто применяемые методы лечения

- ◆ **Иглоукалывание и прижигание**
- ◆ **Массаж гуаша**
- ◆ **Мануальная терапия**
- ◆ **Лечение банками**
- ◆ **Массаж**
- ◆ **...**



Акупунктурный электромассажер для ухода за телом «Исюэтун»



Действие энергомассажера «Исюэтун» основано на таких методах древней китайской медицины, как акупунктура, массаж гуаша и иглоукалывание «мэйхуа», но также сочетает принципы современной **цифровой низкочастотной импульсной терапии**. Под воздействием электромагнитной энергии очищаются каналы «цзинло», достигается физиотерапевтический и оздоровительный эффект.



Акупунктурный электромассажер для ухода за телом «Исюэту»



С помощью четырех уникальных насадок (электроимпульсная насадка, акупунктурная насадка «мэйхуа», насадка для массажа гуаша и косметологическая насадка), воздействующих на соответствующие акупунктурные точки, достигается эффект, идентичный эффективности таких методов китайской традиционной медицины, как иглоукалывание и прижигание, акупунктура «мэйхуа», а также электронного массажа гуаша и электроимпульсной косметологии.



Информация о насадках – насадка гуаша



Массаж «гуаша»- это один из способов лечения заболеваний в традиционной китайской медицине, благодаря скоблению кожи выводятся токсины и достигается цель оздоровления. Массаж «гуаша» стимулирует кровообращение, снимает усталость, выводит токсины. Особенности данного массажа заключаются в том, что эффект очевиден, а манипуляции просты и понятны.



Информация о насадках – насадка гуаша



- Принципы массажа «гуаша»:**
- 1. Движения с верху вниз**
 - 2. Движения изнутри наружу**

Массаж гуаша
с промежутками в 3 см

Спокойно и плавно скоблите кожу вдоль каналов «цзинмай», равномерно распределяйте силу, расстояние между точками скобления должно быть примерно 3 см.



Информация о насадках – насадка гуаша

Обратите внимание:



1. **Массаж «гуаша» необходимо делать в теплом помещении без сквозняка**
2. **До и после массажа необходимо выпить стакан теплой воды**
3. **Принимать душ можно только по прошествии трёх часов после массажа**
4. **Нельзя делать массаж «гуаша» на голодный желудок**
5. **Продолжительность массажа «гуаша» не должна превышать 25 минут**



Электроимпульсная насадка



Методом акупунктуры можно прочистить каналы «цзинло», привести в сбалансированное состояние энергию Инь и Ян в организме, т.е. достичь оздоровительного эффекта. Эффект от использования электроимпульсной насадки идентичен эффекту от использования иглолок традиционной акупунктуры. С помощью этой насадки проводится электроимпульсная стимуляция акупунктурных точек и точечный массаж.

Способы применения



4 метода поддержания здоровья



- 
1. Надавливание.
 2. Растирание.
 3. Скольжение.
 4. Электроимпульсное воздействие.



Электроимпульсная насадка



Точка «**аши**» -- самое болезненное место.

Точка аши излечивает большое количество заболеваний.




Головная боль

- ❖ Точки: **хэгу**, тайчун.
- ❖ Кордицепс, омега-3.




Шум в ушах, снижение слуха

- ❖ Снижение слуха и шум в ушах- это сигнал о снижении функций почек
- ❖ Точки: **чжунцзу**
- ❖ Кордицепс, кальций с высоким содержанием

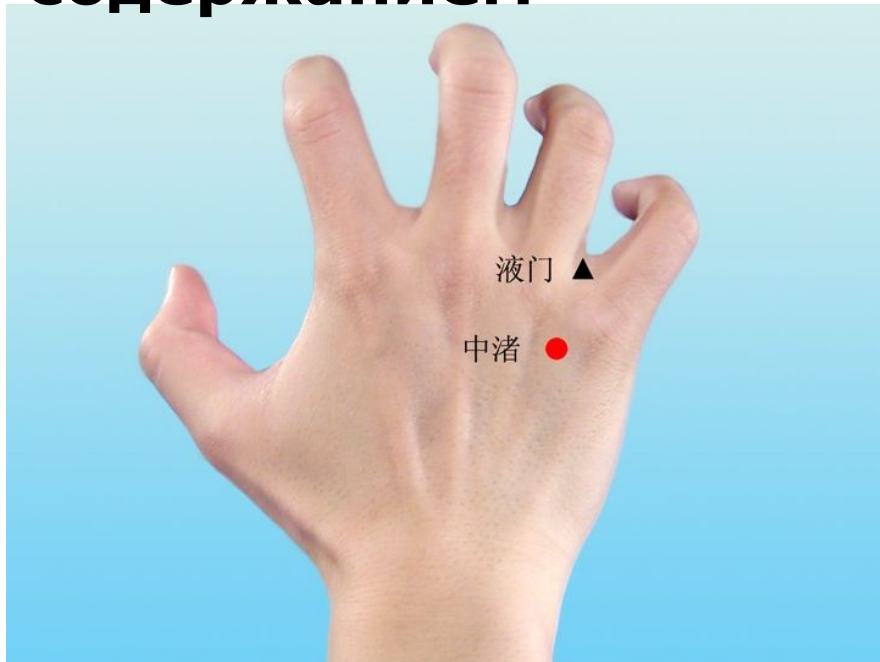



Заболевания шейного позвонка

- ◆ **Распространенные заболевания позвоночника : гиперплазия шейных позвонков , растяжение, вывих**
- ◆ **Точки: лецюэ**

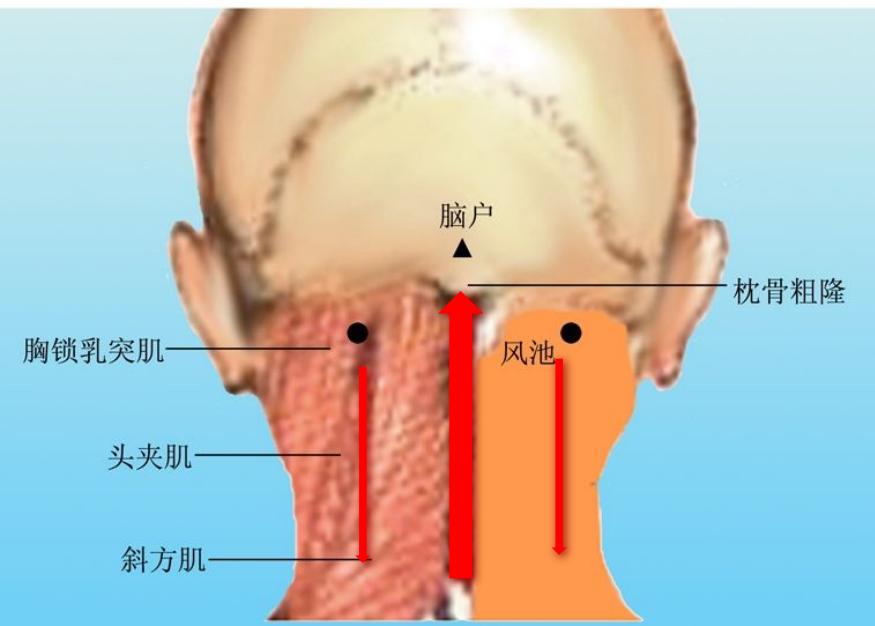


Сердечные заболевания

- ❖ Точки: **фэнмэн, нэйгуань**
- ❖ Кордицепс, Икан, кальций

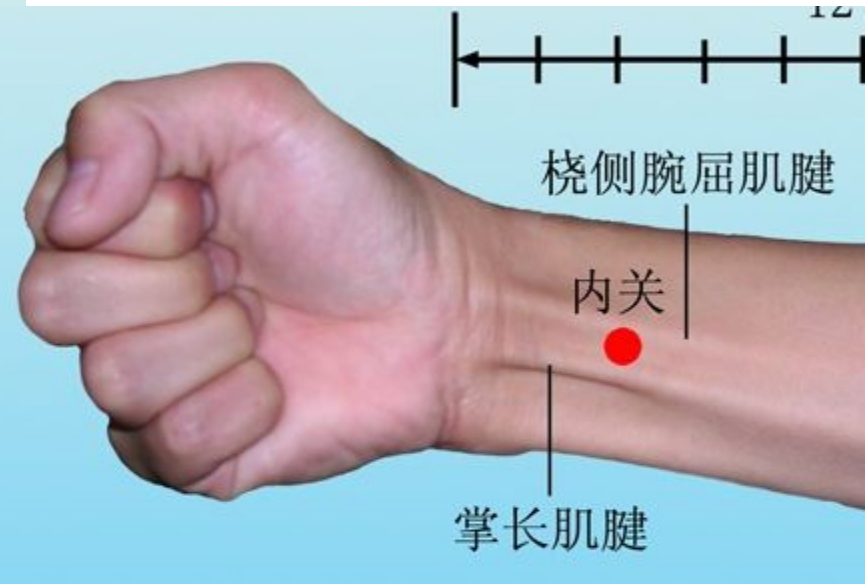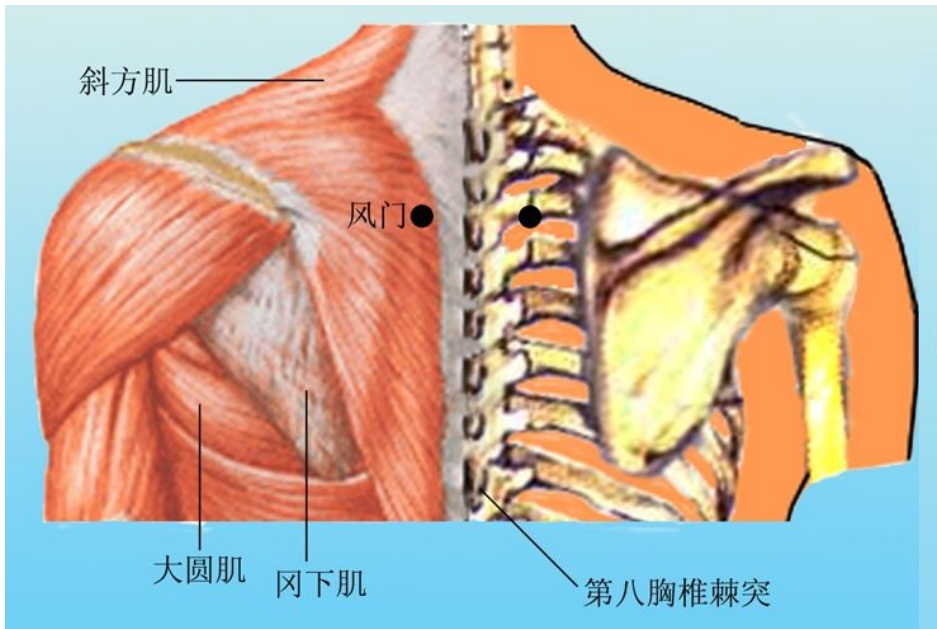

Заболевания пищеварительной системы

- ◆ Включают в себя заболевания селезенки, желудка и кишечника
- ◆ Точки: **шоусаньли, цзусаньли**
- ◆ Хитозан, цинк, кальций

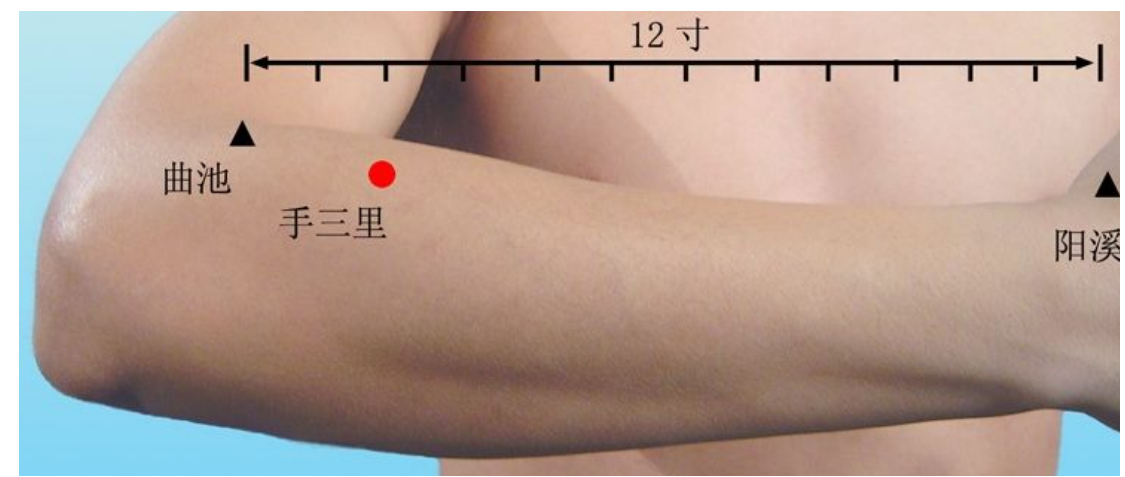

沙棘软胶囊, 螺旋藻, 高钙奶粉




Боль в пояснице-кальций, кордицепс




Информация о насадках – акупунктурная насадка «Мэйхуа»



Выполняет функцию, идентичную функции китайской традиционной акупунктуры «Мэйхуа», т.е. оказывает оздоровительное воздействие с помощью электроимпульсной стимуляции акупунктурных точек, расположенных на эпидермисе, в сочетании с массажным приемом «похлопывания» («коуцы»). Акупунктурная насадка «Мэйхуа» двойного воздействия – иглотерапия и магнитная терапия. Насадка имеет большую поверхность воздействия, с ее помощью легко находить акупунктурные точки, она помогает восстановить баланс энергии Инь и Ян, прочистить каналы «цзинло», а также выполняет следующие функции:

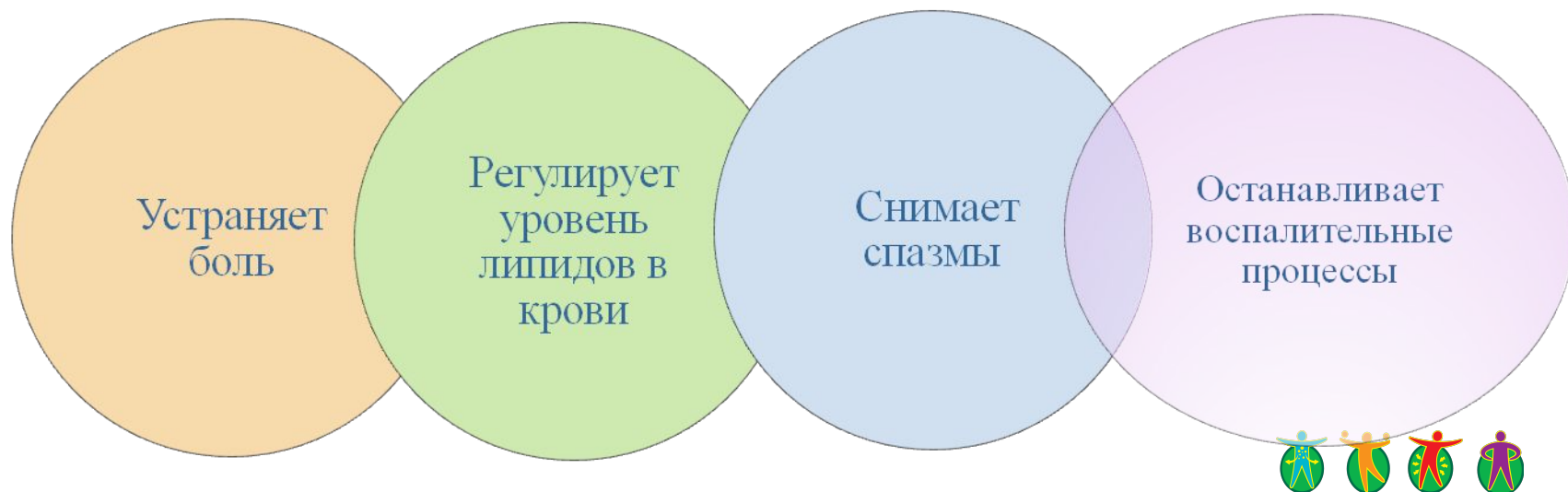

Информация о насадках – косметологическая насадка

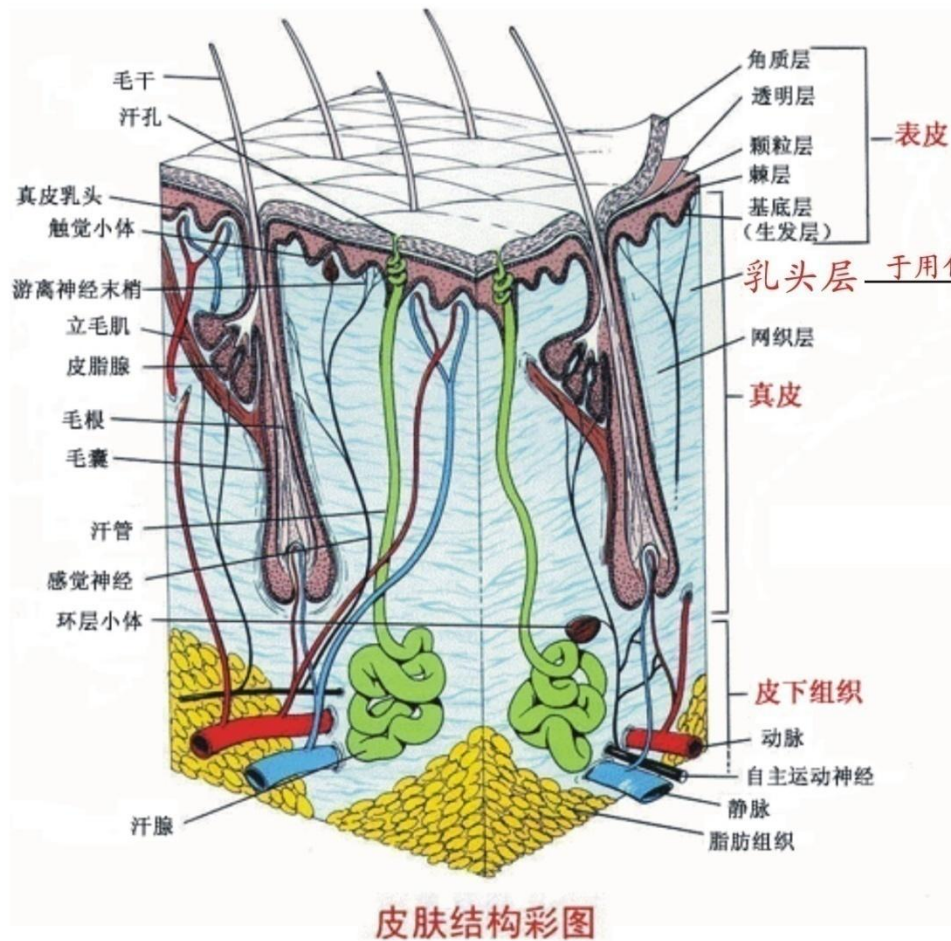

Массируя сосочковый слой дермы (верхний слой кожи, прилегающий к базальному слою эпидермиса) низкочастотный электрический импульс эффективно способствует синтезу коллагена и эластина, повышает упругость и эластичность кожи, тем самым достигается косметологический эффект, который можно усилить, применяя косметические средства компании «Тяньши».



Меры предосторожности



**Перед использованием прибора
внимательно ознакомьтесь с инструкцией**

**Берегите прибор от ударов, воздействия влажности,
высоких температур, не разбирайте прибор
самостоятельно**

**Не держите прибор рядом с мобильным телефоном,
магнитной карточкой, компьютером, телевизором и т.д.**

**Больным с кардиостимулятором следует
пользоваться прибором с осторожностью**

**Беременным и младенцам следует
пользоваться прибором с осторожностью**





Эксплуатация и уход за прибором

- Очищайте прибор после каждого использования. Протирайте корпус прибора сухой тряпкой или ватным диском, массажные насадки протирайте с медицинским спиртом для дезинфекции

- После использования уберите прибор в коробку на хранение для обеспечения сохранности механизма и металлических насадок, ни в коем случае не кладите на прибор тяжелые предметы

- Оберегайте прибор от влаги и химического загрязнения
- Следите за тем, чтобы массажные насадки не были поцарапаны острыми предметами

- В случае неисправности обратитесь за помощью к специалисту, не разбирайте прибор самостоятельно

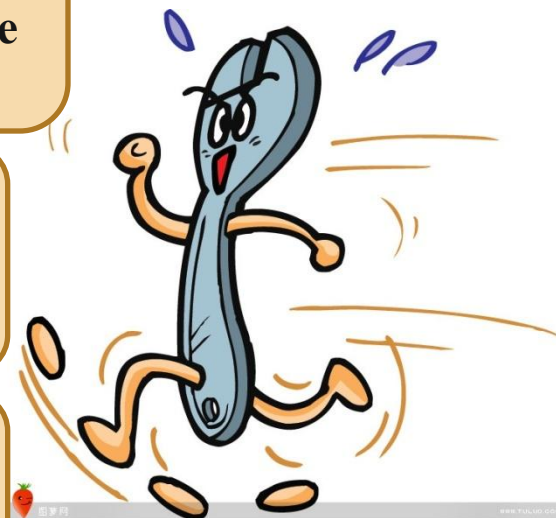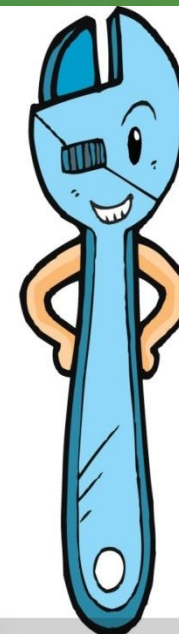

Добрый партнер и помощник

Семейный доктор

Очищает продольные каналы
«цзинмай» и поперечные
каналы
«ломай».

Оказывает оздоровительное
воздействие на мозг, улучшает
умственную деятельность.

Укрепляет физическое
состояние.

Регулирует артериальное
давление



Личный косметолог

Удаляет морщины на
лице,
морщинки в уголках
глаз,
мешки под глазами
и подтягивает кожу



**Красота и здоровье –
то, к чему неизменно во все века
стремилось человечество**

Надеемся, что и вы обретете здоровье!

**Станете обладателем привлекательной
внешности!**



Спасибо!



ru.tiens.com