


Акупунктурный электромассажер для ухода за телом «Исюэтун»



ru.tiens.com

Способы использования массажера Исюэтун

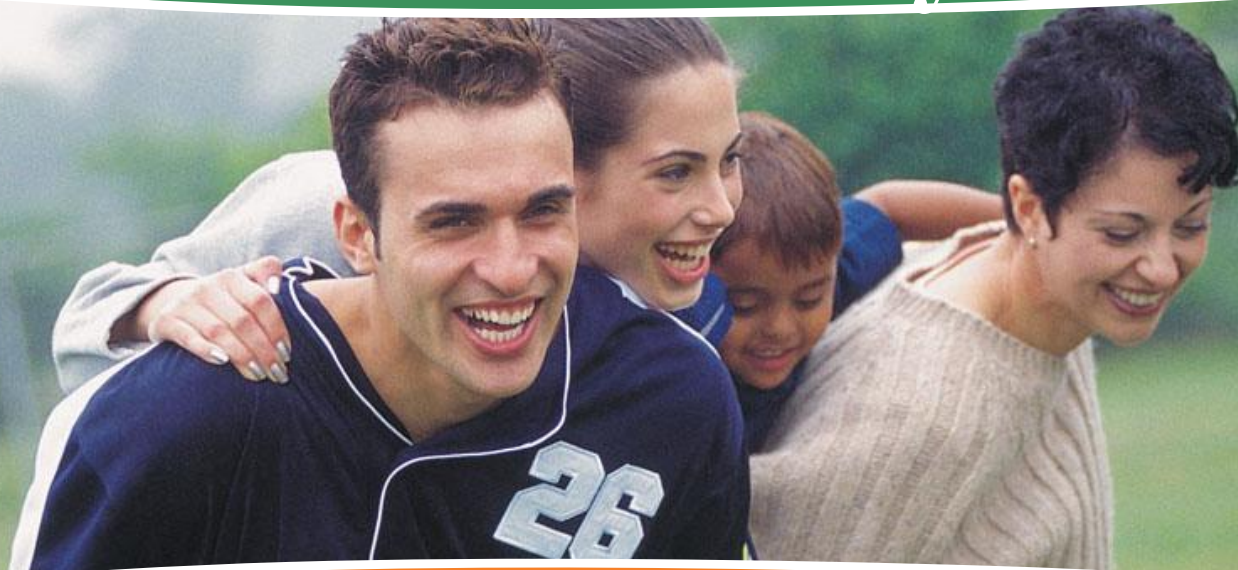

Связь каналов «цзинло» и заболеваний




Проходимость

При нормальной проходимости каналов заболевания не появляются, возникновение болезни означает наличие низкой проходимости каналов.



Что такое каналы «цзинло»?

В китайской традиционной медицине термин «цзинло» включает в себя понятия «цзинмай» (каналы) и «ломай» (коллатеральные сосуды). Каналы «цзинло» представляют собой сеть транзитных дорог, по которым циркулирует жизненная энергия в теле человека (энергия и кровь), которые сообщают между собой все внутренние органы, пронизывают организм снаружи и изнутри, с головы до ног.

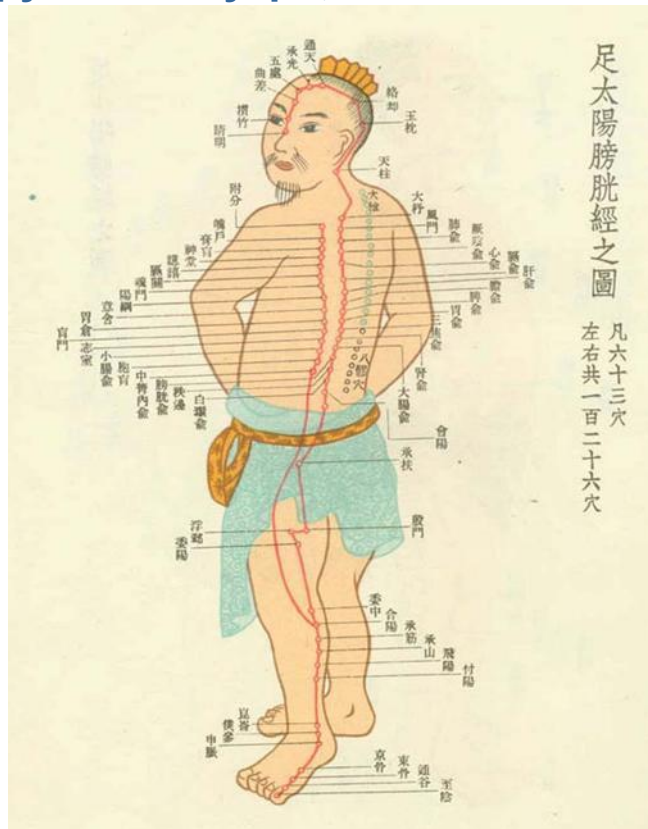

12 меридианов

- ❖ 3 меридиана Инь на руке: верхний – меридиан легких, средний – меридиан перикарда, нижний – меридиан сердца
- ❖ 3 меридиана Ян на руке: верхний – меридиан толстой кишки, средний – меридиан «саньцзяо», нижний – меридиан тонкого кишечника
- ❖ 3 меридиана Инь на ноге: передний – меридиан селезенки, средний – меридиан печени, задний – меридиан почек
- ❖ 3 меридиана Ян на ноге: передний – меридиан желудка, средний – меридиан желчного пузыря, задний – меридиан мочевого пузыря



Часто применяемые методы лечения

- ◆ **Иглоукалывание и прижигание**
- ◆ **Массаж гуаша**
- ◆ **Мануальная терапия**
- ◆ **Лечение банками**
- ◆ **Массаж**
- ◆ **...**



Акупунктурный электромассажер для ухода за телом «Исюэтун»



Действие энергомассажера «Исюэтун» основано на таких методах древней китайской медицины, как акупунктура, массаж гуаша и иглоукалывание «мэйхуа», но также сочетает принципы современной **цифровой низкочастотной импульсной терапии**. Под воздействием электромагнитной энергии очищаются каналы «цзинло», достигается физиотерапевтический и оздоровительный эффект.



Акупунктурный электромассажер для ухода за телом «Исюэту»



С помощью четырех уникальных насадок (электроимпульсная насадка, акупунктурная насадка «мэйхуа», насадка для массажа гуаша и косметологическая насадка), воздействующих на соответствующие акупунктурные точки, достигается эффект, идентичный эффективности таких методов китайской традиционной медицины, как иглокалывание и прижигание, акупунктура «мэйхуа», а также электронного массажа гуаша и электроимпульсной косметологии.



Информация о насадках – насадка гуаша



Массаж «гуаша»- это один из способов лечения заболеваний в традиционной китайской медицине, благодаря скоблению кожи выводятся токсины и достигается цель оздоровления. Массаж «гуаша» стимулирует кровообращение, снимает усталость, выводит токсины. Особенности данного массажа заключаются в том, что эффект очевиден, а манипуляции просты и понятны.



Информация о насадках – насадка гуаша



- Принципы массажа «гуаша»:**
- 1. Движения сверху вниз**
 - 2. Движения изнутри наружу**

Массаж гуаша
с промежутками в 3 см

Спокойно и плавно скоблите кожу вдоль каналов «цзинмай», равномерно распределяйте силу, расстояние между точками скобления должно быть примерно 3 см.



Информация о насадках – насадка гуаша

Обратите внимание:



1. Массаж «гуаша» необходимо делать в теплом помещении без сквозняка
2. До и после массажа необходимо выпить стакан теплой воды
3. Принимать душ можно только по прошествии трёх часов после массажа
4. Нельзя делать массаж «гуаша» на голодный желудок
5. Продолжительность массажа «гуаша» не должна превышать 25 минут



Электроимпульсная насадка



Методом акупунктуры можно прочистить каналы «цзинло», привести в сбалансированное состояние энергию Инь и Ян в организме, т.е. достичь оздоровительного эффекта. Эффект от использования электроимпульсной насадки идентичен эффекту от использования иглок традиционной акупунктуры. С помощью этой насадки проводится электроимпульсная стимуляция акупунктурных точек и точечный массаж.

Способы применения



4 метода поддержания здоровья



- 
1. Надавливание.
 2. Растирание.
 3. Скольжение.
 4. Электроимпульсное воздействие.



Электроимпульсная насадка



Точка «**аши**» -- самое болезненное место.

Точка аши излечивает большое количество заболеваний.




Головная боль

- ❖ Точки: **хэгу**, тайчун.
- ❖ Кордицепс, омега-3.




Шум в ушах, снижение слуха

- ❖ Снижение слуха и шум в ушах- это сигнал о снижении функций почек
- ❖ Точки: **чжунцзу**
- ❖ Кордицепс, кальций с высоким содержанием

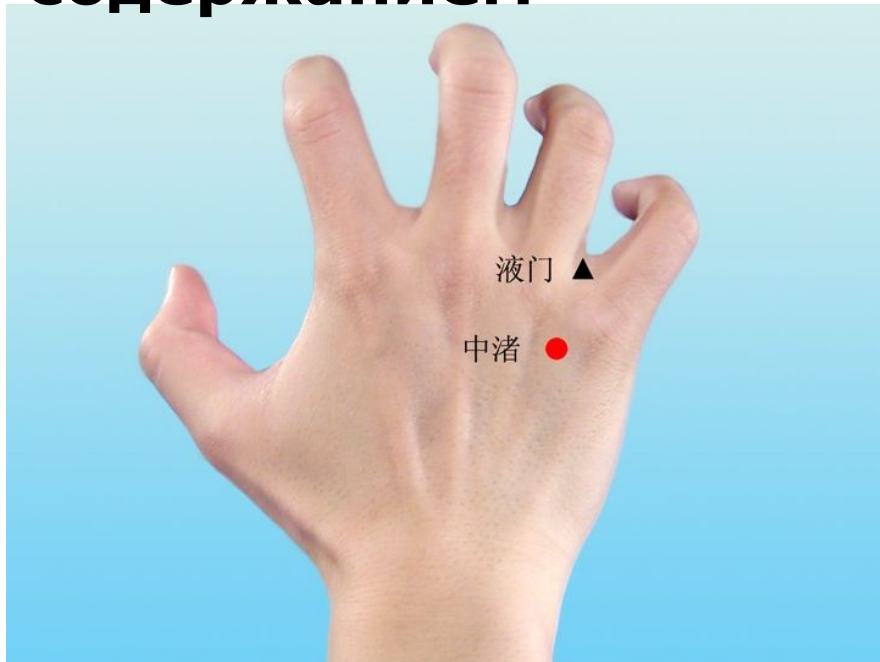



Заболевания шейного позвонка

- ❖ **Распространенные заболевания позвоночника : гиперплазия шейных позвонков , растяжение, вывих**
- ❖ **Точки: лецюэ**

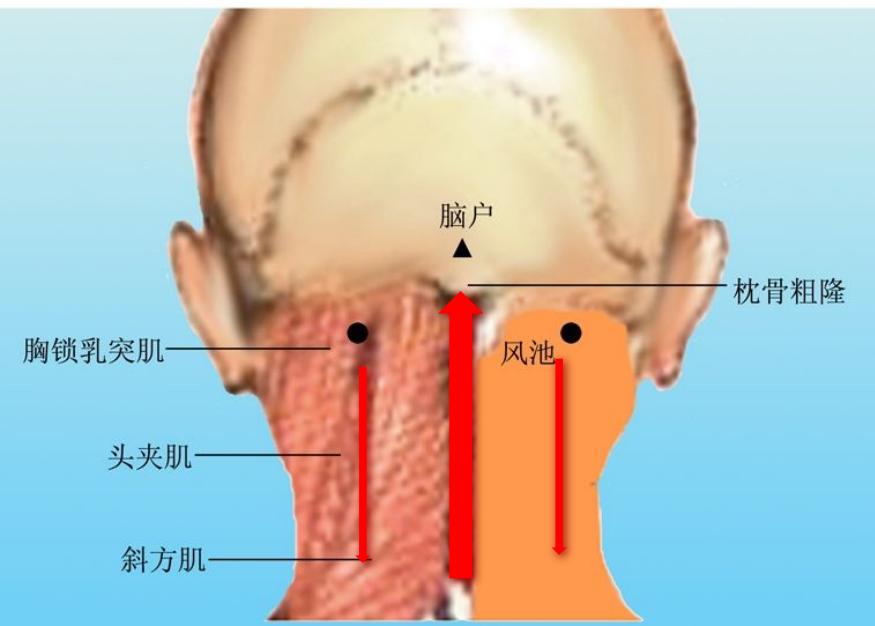


Сердечные заболевания

- ◆ Точки: **фэнмэн, нэйгуань**
- ◆ Кордицепс, Икан, кальций

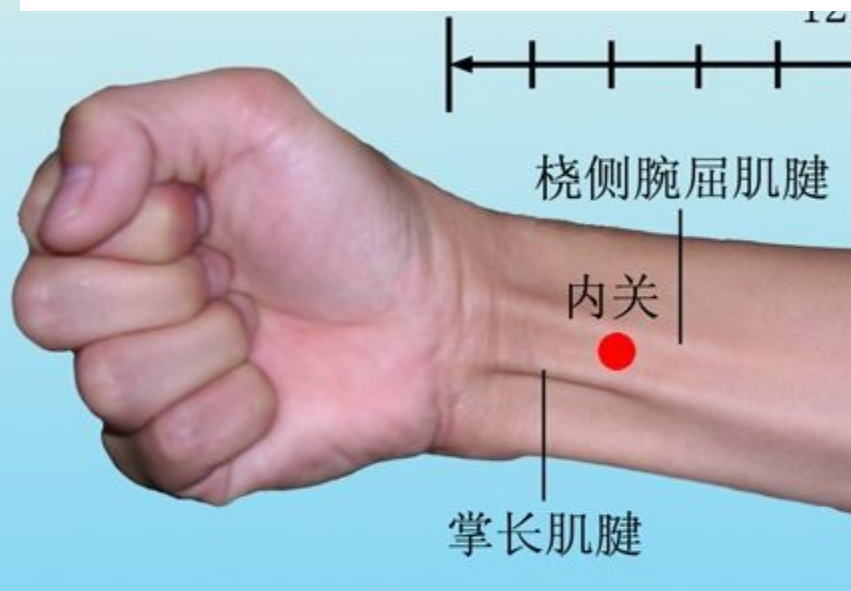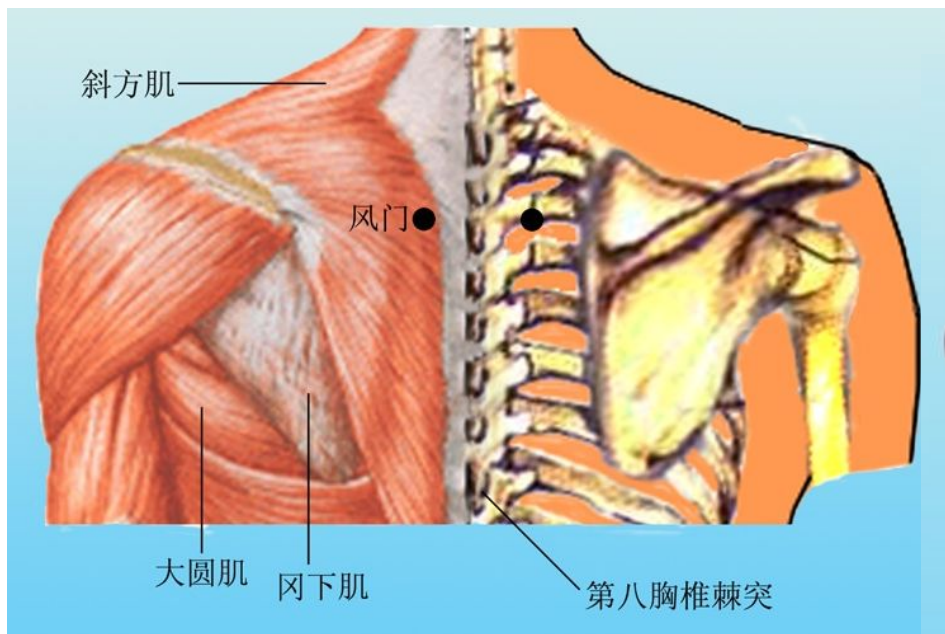

Заболевания пищеварительной системы

- ◆ Включают в себя заболевания селезенки, желудка и кишечника
- ◆ Точки: **шоусаньли, цзусаньли**
- ◆ Хитозан, цинк, кальций

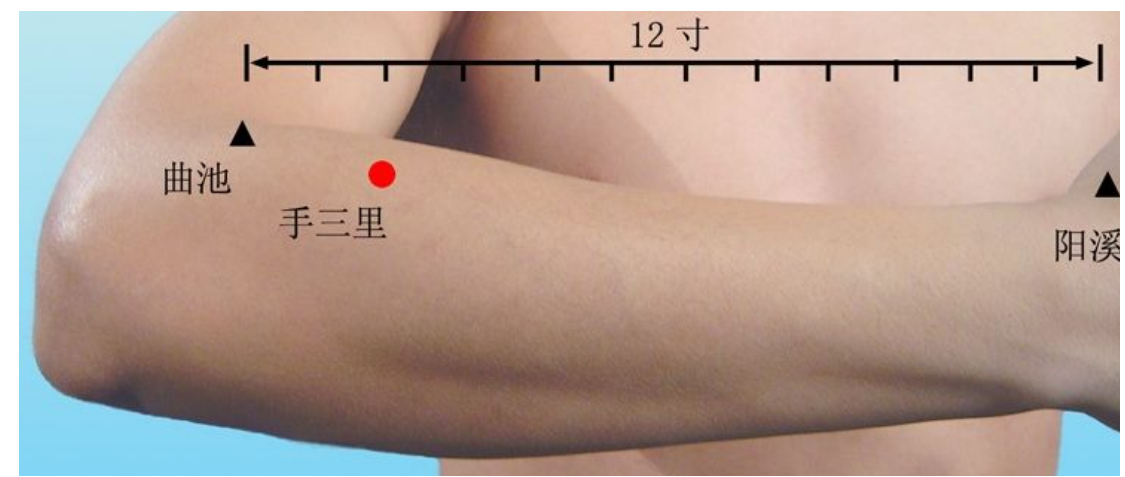

沙棘软胶囊, 螺旋藻, 高钙奶粉




Боль в пояснице-кальций, кордицепс




Информация о насадках – акупунктурная насадка «Мэйхуа»



Выполняет функцию, идентичную функции китайской традиционной акупунктуры «Мэйхуа», т.е. оказывает оздоровительное воздействие с помощью электроимпульсной стимуляции акупунктурных точек, расположенных на эпидермисе, в сочетании с массажным приемом «похлопывания» («коуцы»). Акупунктурная насадка «Мэйхуа» двойного воздействия – иглотерапия и магнитная терапия. Насадка имеет большую поверхность воздействия, с ее помощью легко находить акупунктурные точки, она помогает восстановить баланс энергии Инь и Ян, прочистить каналы «цзинло», а также выполняет следующие функции:

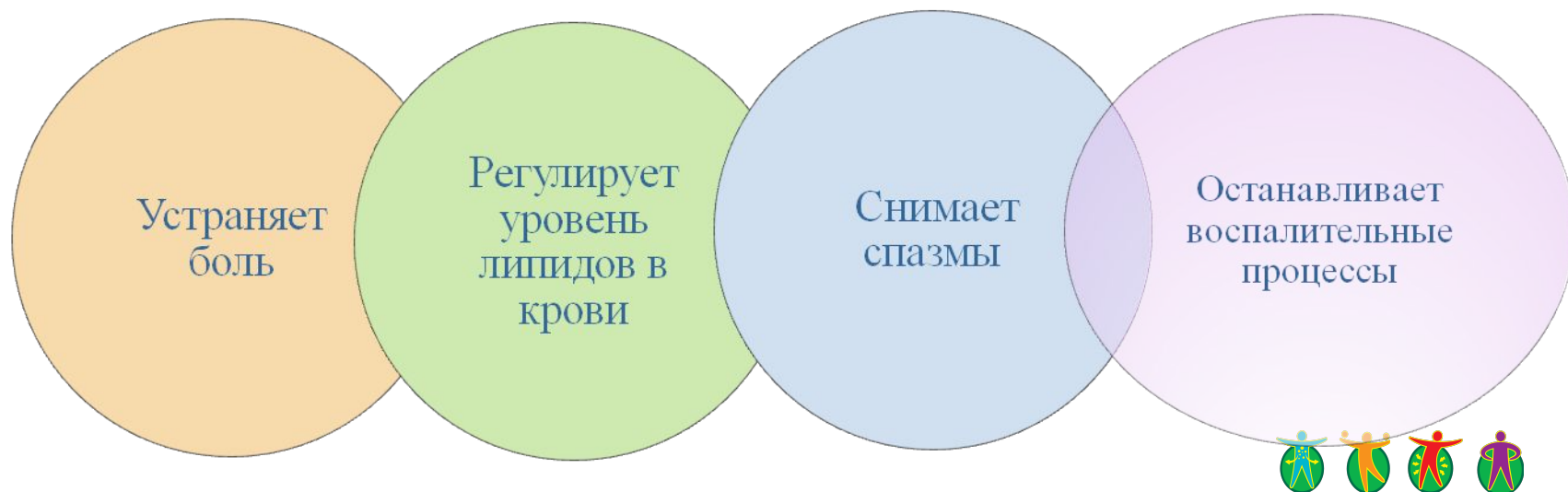

Информация о насадках – косметологическая насадка

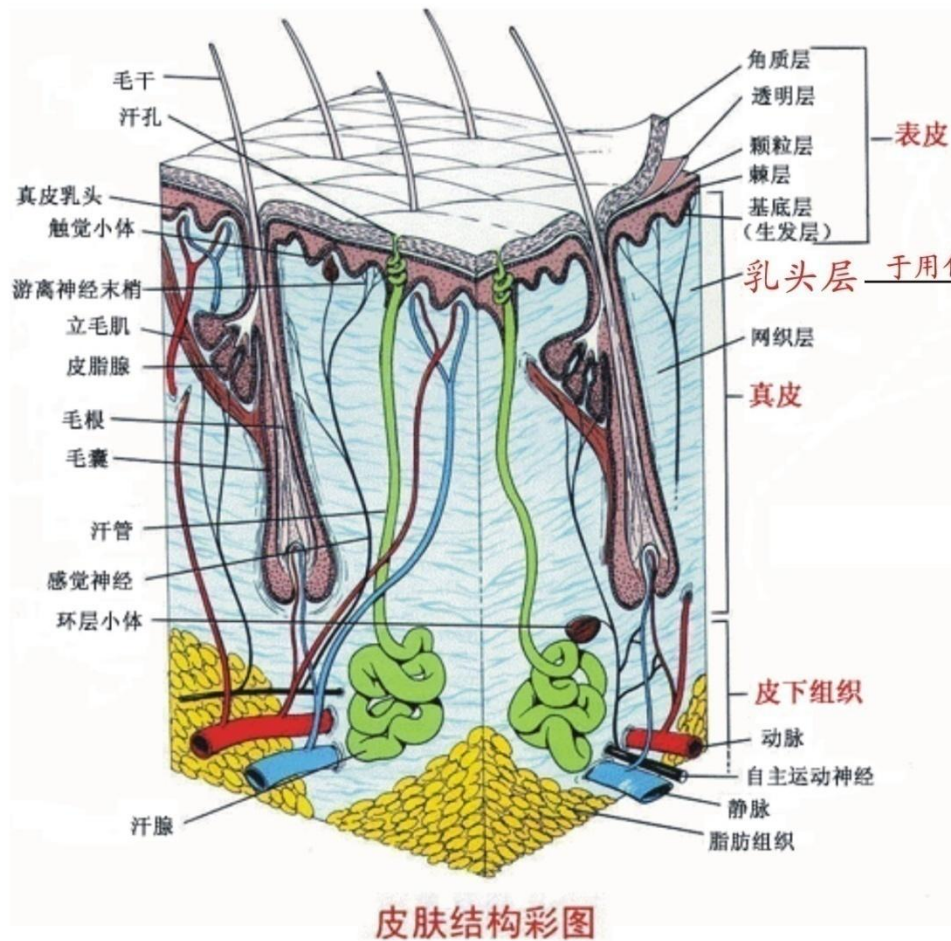

Массируя сосочковый слой дермы (верхний слой кожи, прилегающий к базальному слою эпидермиса) низкочастотный электрический импульс эффективно способствует синтезу коллагена и эластина, повышает упругость и эластичность кожи, тем самым достигается косметологический эффект, который можно усилить, применяя косметические средства компании «Тяньши».



Меры предосторожности



**Перед использованием прибора
внимательно ознакомьтесь с инструкцией**

**Берегите прибор от ударов, воздействия влажности,
высоких температур, не разбирайте прибор
самостоятельно**

**Не держите прибор рядом с мобильным телефоном,
магнитной карточкой, компьютером, телевизором и т.д.**

**Больным с кардиостимулятором следует
пользоваться прибором с осторожностью**

**Беременным и младенцам следует
пользоваться прибором с осторожностью**





Эксплуатация и уход за прибором

- Очищайте прибор после каждого использования. Протирайте корпус прибора сухой тряпкой или ватным диском, массажные насадки протирайте с медицинским спиртом для дезинфекции

- После использования уберите прибор в коробку на хранение для обеспечения сохранности механизма и металлических насадок, ни в коем случае не кладите на прибор тяжелые предметы

- Оберегайте прибор от влаги и химического загрязнения
- Следите за тем, чтобы массажные насадки не были поцарапаны острыми предметами

- В случае неисправности обратитесь за помощью к специалисту, не разбирайте прибор самостоятельно

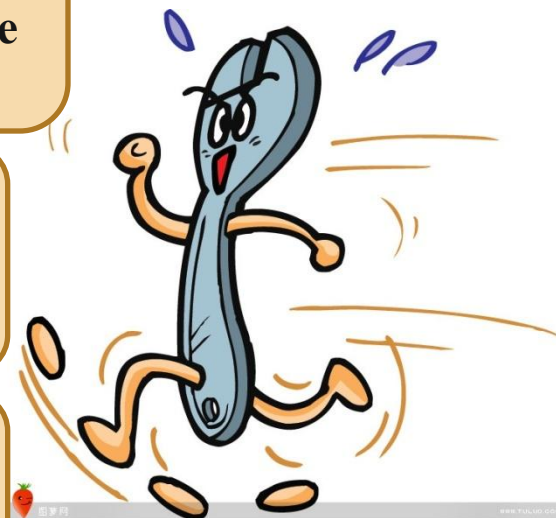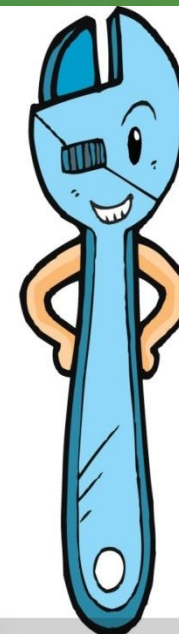

Добрый партнер и помощник

Семейный доктор

Очищает продольные каналы
«цзинмай» и поперечные
каналы
«ломай».

Оказывает оздоровительное
воздействие на мозг, улучшает
умственную деятельность.

Укрепляет физическое
состояние.

Регулирует артериальное
давление



Личный косметолог

Удаляет морщины на
лице,
морщинки в уголках
глаз,
мешки под глазами
и подтягивает кожу



**Красота и здоровье –
то, к чему неизменно во все века
стремилось человечество**

Надеемся, что и вы обретете здоровье!

**Станете обладателем привлекательной
внешности!**



Спасибо!



ru.tiens.com