

Питательные среды для
медицинской микробиологии.
Методы и техники посевов
микроорганизмов

Метаболизм бактерий -

- совокупность двух противоположных, но взаимосвязанных процессов — *катаболизма*, или энергетического метаболизма, и *анаболизма*, или пластического (конструктивного) метаболизма.
- У прокариот, так же как у эукариот, в процессе ферментативных *катаболических реакций* происходит выделение энергии, которая аккумулируется в молекулах АТФ.
- В процессе ферментативных *анаболических реакций* эта энергия расходуется на синтез многочисленных макромолекул органических соединений, из которых в конечном итоге строятся составные части микробной клетки.

Типы питания бактерий

Источник питания	Группы микроорганизмов
1. Углерод	Автотрофы Гетеротрофы
2. Энергия	Фототрофы Хемотрофы
3. Доноры электронов	Литотрофы Органотрофы

Таблица 1

Приблизительный элементарный состав бактериальных клеток (Р. Стейниер, Э. Эдельберг, Дж. Ингрэм, 1979)

№	Элементы	Содержание, % от сухого вещества	№	Элементы	Содержание, % от сухого вещества
1	Углерод	50	7	Калий	1
2	Кислород	20	8	Натрий	1
3	Азот	14	9	Кальций	0,5
4	Водород	8	10	Магний	0,5
5	Фосфор	3	11	Хлор	0,5
6	Сера	1	12	Железо	0,2
				Все остальные элементы	~0,3

Источники углерода и азота

В микробиологии источником **органических веществ** являются:

- 1. Мясной экстракт, настой - продукты специальной обработки мяса животных
- 2. Пептон – продукт ферментативного (пепсин, трипсин) гидролиза белков мяса
- 3. Рыбный гидролизат (ГРМ)
- 4. Дрожжевой автолизат и гидролизат
- 5. Казеин – фосфорсодержащий белок молока – гидролизат
- 6. Гидролизаты растительного происхождения (соевый)
- 7. Другие продукты

Факторы роста бактерий

- аминокислоты,
- пуриновые и пиримидиновые основания,
- липиды,
- витамины,
- железопорфирины (гем)
- и другие соединения.

Питательные среды. Состав

- **Натуральные** – состоят из продуктов животного или растительного происхождения и имеют неопределенный химический состав. Например: овощные и фруктовые соки, животные ткани, кровь, молоко, яйца и т.д. (МПА, МПБ).
- **Полусинтетические** – в состав входят соединения известной химической природы и вещества неопределенного состава. Например: МПБ с глюкозой, среда Эндо, среда Сабуро.
- **Синтетические** – содержат только химически чистые соединения в точных концентрациях. Применяют в лабораторных экспериментах. Например: среда Чапека, Омелянского, Ушинского и т.д.

Среда Чапека

Вода водопроводная	1000 мл
NaNO ₃	2 г
KH ₂ PO ₄	1 г
KCl	0,5 г
MgSO ₄	0,5 г
FeSO ₄	0,01 г
Сахароза	30 г

Среда Омелянского

Вода дистиллированная	1 л
K ₂ HPO ₄	1 г
(NH ₄) ₂ HPO ₄	1 г
MgSO ₄	0,5 г
CaCl ₂	0,1 г
NaCl	Следы
FeSO ₄	Следы

К этой среде добавляют 5 г углевода или солей органической кислоты также тот или другой индикатор (азолитмин, бромтимол-блеу).

Среда Ушинского

Вода дистиллированная	1 л
Глицерин	30–40 г
NaCl	5–7 г
CaCl ₂	0,1 г
MgSO ₄	0,2–0,4 г
K ₂ HPO ₄	2–2,5 г
Аммоний молочнокислый	6–7 г
Аспарагин	3–5 г

Питательные среды.

Назначение

- **Универсальные** (общего назначения)- пригодны для выращивания многих видов микроорганизмов и применяются как основа для специальных питательных сред. Примеры: МПБ, МПА, среда Хоттингера, ГРМ, тиогликолевая среда.
 - **Специальные** применяют в тех случаях, когда микроорганизмы не растут на простых средах. К ним принадлежит кровяной, сывороточный агар, сывороточный бульон, асцитический бульон, асцит-агар и другие.
1. **Элективные среды** - на них одни микроорганизмы растут быстрее и более интенсивно, чем другие виды бактерий. Например, 1 % щелочная пептонная вода является элективной средой для холерных вибрионов, среды Ру и Леффлера – для возбудителей дифтерии.
 2. **Селективные** - благодаря селективным добавкам (желчь, краски, антибиотики и др.) способны подавлять развитие одних видов микроорганизмов, но не влияют на другие виды. Примеры: среда Мюллера является селективной для тифо-паратифозных бактерий, фуразолидоно-твиновый агар – для коринебактерий и микрококков. Добавление антибиотиков в состав сред делает их селективными для грибов (напр. среда Сабуро и др.).


Питательные среды.

Назначение


3. Дифференциально-диагностические - группа сред, которые позволяют определить биохимические свойства микроорганизмов и провести их дифференциацию. Они разделяются на среды для определения протеолитических, пептолитических, сахаролитических, гемолитических, липолитических, редуцирующих свойств (среды Эндо, Левина, Плоскирева, Гисса).



Среды
Гисса

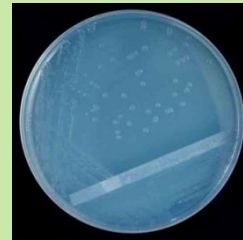

Среда
Левина

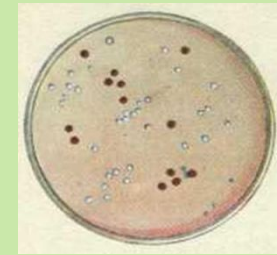

Среда
Плоскирева

4. Консервирующие (транспортные)-

предназначены для сохранения жизнеспособности микроорганизмов от момента взятия биоматериала до посева для диагностики



Категории питательных сред по консистенции:


- **Жидкие** (бульоны) – изучение физиолого-биохимических особенностей и накопление биомассы микроорганизмов
- **Полужидкие** (1% агара) – хранение культур и культивирование анаэробов
- **Плотные** (3-5% агара)– выделение чистых культур, накопление, количественный учет, изучение культуральных свойств, антагонистические взаимоотношения
- **Сыпучие** – хранение посевного материала в промышленности (пшено, отруби)
- **Сухие** – выпускаются промышленностью для приготовления питательных сред

Уплотнители питательных сред



Роберт Кох
(1843-1910)

Роберт Кох предложил использовать желатин для того, чтобы превращать питательный бульон в плотную массу.
Недостаток: плавится при $T=25^{\circ}\text{C}$.

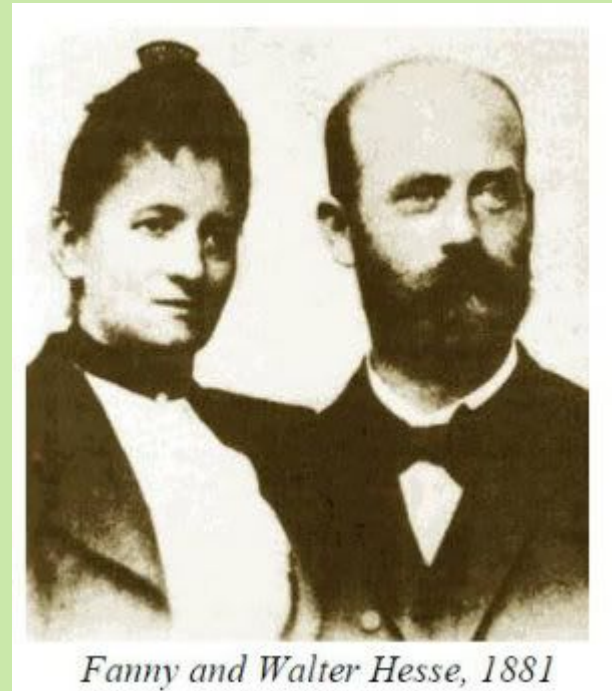

Fanny and Walter Hesse, 1881

Вальтер Хессе (1846 - 1911)
В. Хессе предложил использовать агар-агара в качестве уплотнителя среды для культивирования микроорганизмов.



Агар-Агар



Водоросли *Gracilaria* и *Gelidium* - два основных источника для коммерческого производства агара



Сухие пластинки агара-агара.
Плавится при $T=80-100^{\circ}\text{C}$,
застывает при $T=37-40^{\circ}\text{C}$

Транспортная система со средой Стюарта

- Среда Стюарта представляет собой полужидкий, бедный питательными веществами субстрат для сохранения и транспортировки широкого спектра патогенных микроорганизмов, таких, как *Neisseria gonorrhoeae*, *Haemophilus influenzae*, *Corynebacterium diphtheriae*, *Trichomonas vaginalis*, *Streptococcus sp.*, *Salmonella sp.*, *Shigella sp.* и др. Наиболее требовательные микроорганизмы сохраняются в данной среде более суток, прочие – до нескольких дней.
- Наличие в среде тиогликолата подавляет ферментативную активность бактерий, а отсутствие азота предотвращает их размножение.



Натрия тиогликолят	1,00 г/л
Натрия глицерофосфат	10,00
Кальция хлорид	0,10
Метиленовый синий	0,002
Агар-агар	3,00
Конечное значение pH (при 25°C)	7,4 ± 0,2

Транспортная система со средой Кери Блэйр

- Транспортная среда Кери Блейр представляет собой модификацию базовой транспортной среды Стюарта, предназначенную специально для фекальных образцов.
- Глицерофосфат, являющийся метаболитом некоторых энтеробактерий (*Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, и др.), заменен неорганическим фосфатом,
- удален метиленовый синий и рН среды увеличена до 8,4.
- Среда Кери Блейр позволяет сохранять большинство патогенов, включая требовательные микроорганизмы, такие как *Neisseria sp.*, *Haemophilus sp.*, *Streptococcus sp.*
- Данная среда является стандартной для транспортировки анаэробов.



Транспортная система со средой Эймса

- Транспортная среда Эймса представляет собой очередную модификацию базовой транспортной среды Стюарта, в которой глицерофосфат заменен неорганическим фосфатом, поскольку глицерофосфат является метаболитом некоторых энтеробактерий (*Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, etc.) и может поддерживать рост некоторых грамотрицательных микроорганизмов.
- Метиленовый синий заменен на активированный уголь фармацевтического качества.
- В среду добавлены кальций и магний для поддержания проницаемости бактериальных клеток.
- Эта среда способна более 3 дней поддерживать такие микроорганизмы, как *Neisseria sp.*, *Haemophilus sp.*, *Corynebacteria*, *Streptococci*, *Enterobacteriaceae* и др., однако наилучшие результаты дает культивирование в течение первых 24 часов.




Универсальные накопительные среды

Мясопептонный агар (МПА) и мясопептонный бульон (МПБ)

- Являются основными средами для посевов микроорганизмов, для проверки чистоты культур перед биохимическим и серотипированием.
- Их используют для культивирования и подсчета неприхотливых микроорганизмов. В полужидком виде среда может быть использована для хранения контрольных (эталонных) микроорганизмов.

Аналог – среда ГРМ (гидролизат рыбной муки)

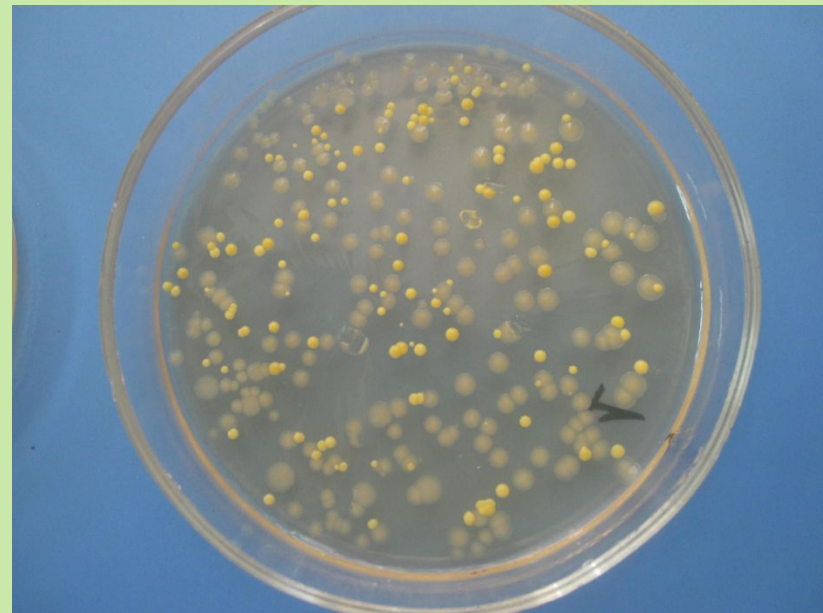

Состав (г/л):

Пептический перевар животной ткани	5,00
Мясной экстракт	1,50
Дрожжевой экстракт	1,50
Натрия хлорид	5,00
Агар-агар	15,00
Конечное значение pH (при 25°C)	7,4 ± 0,2

Универсальные накопительные среды

Среда Хоттингера

- Предназначен для культивирования различных микроорганизмов, таких как энтеробактерии, синегнойная палочка, стафилококки, некоторые виды стрептококков. При необходимости может быть обогащен углеводами, солями.
- Содержит гидролизат Хоттингера, который получают путём ферментативного гидролиза мясного фарша (говяжьего) панкреатином с последующим фильтрованием и добавлением хлороформа в качестве консерванта.



Состав (г/л):

Ферментативный гидролизат животной ткани 5,00

Фосфат калия 10,0

Натрия хлорид 5,00

Агар-агар 15,00

Конечное значение pH (при 25°C) $7,4 \pm 0,2$

Универсальные накопительные среды

Среда Мюллера-Хинтона

- Эту среду используют для культивирования *Neisseria sp.*

и

- для определения чувствительности микроорганизмов к антимикробным средствам.

Состав (г/л):

Мясной настой 300,00

Гидролизат казеина 17,50

Крахмал 1,50

Агар-агар 17,00

Конечное значение pH (при 25°C) $7,3 \pm 0,2$



Специальные дифференциально-диагностические среды

Предназначены для выявления биохимических особенностей, характерных для данной таксономической группы

Таблица 4

Дифференцирующие компоненты дифференциально-диагностических сред

Компонент	Определяемый признак
Углеводы: арабиноза, глюкоза, галактоза, ксилоза, лактоза, мальтоза, рафиноза, рамноза, сахароза, фруктоза, целлобиоза	Способность использовать в качестве источника углерода
Спирты: глицерол, адонит, эритрит, маннит, дульцит, сорбит	Способность использовать в качестве источника углерода
Цитраты, малонаты, тартраты	Способность использовать в качестве источника углерода
Аминокислоты: аргинин, глутаминовая кислота, лизин, орнитин	Наличие декарбоксилазы
Фенилаланин	Наличие дезаминазы
Триптофан	Образование индола
Мочевина	Наличие уреазы
Желатин	Наличие протеаз
Желток яичный	Наличие лецитиназы
О-нитрофенол, β -Д-Галактопиранозид	Наличие галактозидазы
Соли Fe^{++}	Образование H_2S

Специальные дифференциально- диагностические среды

Таблица 5

Свойства кислотно-основных индикаторов (ЧДА)

Индикатор	Интервал pH	Цвет среды
Бромфеноловый синий	3,0–4,6	желтый-синий
Метиловый красный	4,2–6,3	красный-желтый
Бромкрезоловый пурпурный	5,2–6,8	желтая-пурпуровая
Бромтимоловый синий	6,0–7,6	желтая-синяя
Водно-голубой + розоловая кислота	6,2–8,0	синяя-розовая
Нейтральный кислый	6,8–8,0	красная-желтая
Феноловый красный	6,8–8,4	желтая-красная

Дифференциально-диагностические среды

Среда МакКонки

- Среда МакКонки в качестве дифференциальных рекомендуют для селективного выделения энтеробактерий и близких к ним грамотрицательных палочек.



Рост на среде МакКонки (M082) колоний *Escherichia coli* (крупные красные), *Salmonella* серовара *Typhi* (бесцветные), *Staphylococcus aureus* (мелкие красные) *Enterococcus faecalis* (точечные)

Лактозоположительные штаммы растут с образованием розовых или красных колоний, которые могут быть окружены зоной преципитации желчных солей.

Красный цвет появляется в результате закисления среды продуктами разложения лактозы (при падении рН ниже 6,8) и адсорбции нейтрального красного.

Штаммы, не ферментирующие лактозу (шигеллы, сальмонеллы), обычно образуют прозрачные бесцветные колонии и не изменяют среду.

Основные компоненты среды МакКонки:

Питательная основа: Пептический перевар животной ткани, Протеозопептон, Гидролизат казеина, Панкреатический перевар желатина, Лактоза

Дифференцирующий фактор Соли желчных кислот (1,5г/л), Натрия хлорид (5г/л)

Индикатор Кристаллический фиолетовый, Нейтральный красный

Дифференциально-диагностические среды

Среда Эндо

- Эту среду рекомендуют для выделения и дифференциации грамотрицательных микроорганизмов кишечной группы.
- Эта среда разработана Endo как культуральная среда для дифференциации микроорганизмов, ферментирующих и неферментирующих лактозу. Она используется для микробиологического исследования воды, стоков, молочных и других пищевых продуктов.
- Сульфит натрия и основной фуксин обладают подавляющим эффектом на грамположительные микроорганизмы. Лактоза разлагается микроорганизмами до альдегида и кислоты. Альдегид в свою очередь освобождает фуксин из фуксин-сульфитного комплекса, усиливая красное окрашивание колоний. У кишечных палочек эта реакция очень выражена и сопровождается кристаллизацией фуксина, что проявляется зеленоватым металлическим блеском (фуксиновый глянец) колоний.




Состав (г/л):
Пептический перевар животной ткани 10,00

Лактоза	10,00
Калия гидрофосфат	3,50
Натрия сульфит	2,50
Фуксин основной	0,50
Агар-агар	15,00
Конечное значение pH (при 25°C)	7,5 ± 0,2

Дифференциально-диагностические среды

Желточно-солевой агар

- Эту среду используют в качестве селективной для выделения клинически значимых культур стафилококков.
- Среда содержат протеозопептон и мясной экстракт, что делает ее очень питательной ввиду содержания необходимых ростовых факторов. Вместе с тем рост бактерий, кроме стафилококков, подавляется высокой концентрацией (7,5%) хлорида натрия.
- Маннит является ферментируемым и дифференцирующим субстратом, а также источником углерода.
- Добавление (до 5% об/об) эмульсии яичного желтка дает возможность определить липазную активность микроорганизмов. Эмульсия в солевой среде становится прозрачной, поэтому при наличии липазной активности вокруг колоний формируется желтая непрозрачная зона.

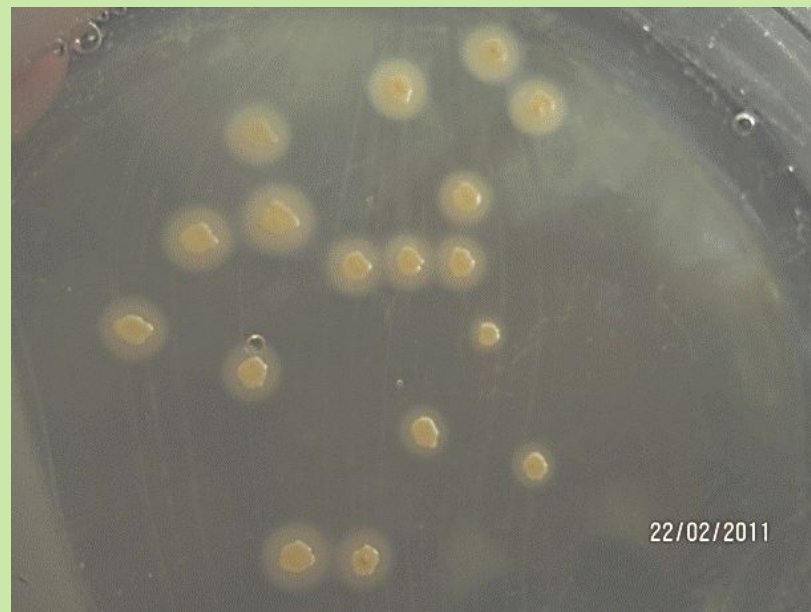

Состав (г/л):

Протеозопептон	10,00
Мясной экстракт	1,00
Натрия хлорид	75,00
D-Маннит	10,00
Феноловый красный	0,025
Агар-агар	15,00
Конечное значение рН (при 25°С)	7,4 ± 0,2

Дифференциально-диагностические среды

Вильсона-Блера или Висмут-сульфитный агар

- Селективная среда для выделения сальмонелл.
- Пептический перевар животной ткани и мясной экстракт служат источником азотистых питательных веществ, углерода, серы, витаминов группы В и микроэлементов, необходимых для роста указанных бактерий.
- Бриллиантовый зеленый подавляет рост всех грамположительных бактерий. Глюкоза является ферментируемым углеводом. Сульфат железа позволяет выявить продукцию сероводорода.
- Висмут является тяжелым металлом, который подавляет рост большинства грамотрицательных кишечных бактерий, кроме сальмонелл.
- Сальмонеллы восстанавливают сульфат железа в присутствии глюкозы и сульфита висмута до сульфида железа, который окрашивает их колонии в черный цвет.




Состав (г/л):

Пептический перевар животной ткани	10,00
Мясной экстракт	5,00
Глюкоза	5,00
Натрия гидрофосфат	4,00
Железа сульфат	0,30
Висмута сульфит, индикатор	8,00
Бриллиантовый зеленый	0,025
Агар-агар	20,00
Конечное значение pH (при 25°C)	7,7 ± 0,2

Специальные селективные среды

Среда Леффлера

- Эту среду с добавлением лошадиной сыворотки используют для культивирования *Corynebacterium diphtheriae* из клинического материала и пересевов чистых культур этих микроорганизмов.
- Высокая концентрация сыворотки помогает определить протеолитическую активность микроорганизмов, а также пигментообразование. Пептон и мясной экстракт обеспечивают микроорганизмы важнейшими питательными веществами. Глюкоза является ферментируемым субстратом и источником энергии.

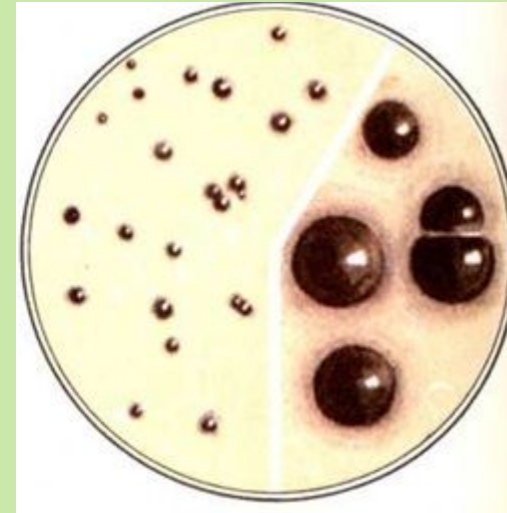

Состав (г/л):

Пептон специальный 2,50

Мясной экстракт 2,50

Натрия хлорид 1,25

Глюкоза 2,50

Конечное значение pH (при 25°C) 7,3 ±

Перед разливом по чашкам добавить
750 мл стерильной лошадиной
сыворотки

Специальные селективные среды Кампилобакагар

- Селективная среда для кампилобактерий которая состояла из основы кровяного агара с бараньей кровью или лошадиной кровью и антибиотиками .
- Антимикробные компоненты, существенно подавляют рост нормальной микрофлоры, способствуя росту и выделению из испражнений *Campylobacter fetus ssp. jejuni*.
- Присутствие амфотерицина В в добавке существенно или полностью подавляет рост грибов, введенный позже цефалотин усиливает подавление нормальной кишечной микрофлоры .
- Колонии *Campylobacter fetus ssp. jejuni* имеют слизистый характер, плоские серые с неправильными очертаниями или приподнятые, округлые, без гемолиза.
- Некоторые штаммы могут образовывать желто-коричневые или розоватые колонии.
- На влажной поверхности среды может наблюдаться слияние роста или роение.



Основа состав (г/л):

Протеозопептон	15,00
Печеночный перевар	2,50
Дрожжевой экстракт	5,00
Натрия хлорид	5,00
Агар-агар	12,00


Конечное значение pH (при 25°C) 7,4 ± 0,2

Селективная добавка :

Полимиксин В	1250 МЕ
Ванкомицин	5,0 мг
Триметоприм	2,5 мг
Амфотерицин В	1,0 мг
Цефалотин	7,5 мг

Перед розливом среды в нее добавляют: стерильную лизированную кровь лошади (до 5-7% об/об) или стерильную дефибринированную баранью кровь (до 10%) и селективную добавку для кампилобактеров



Техника посева на питательные среды

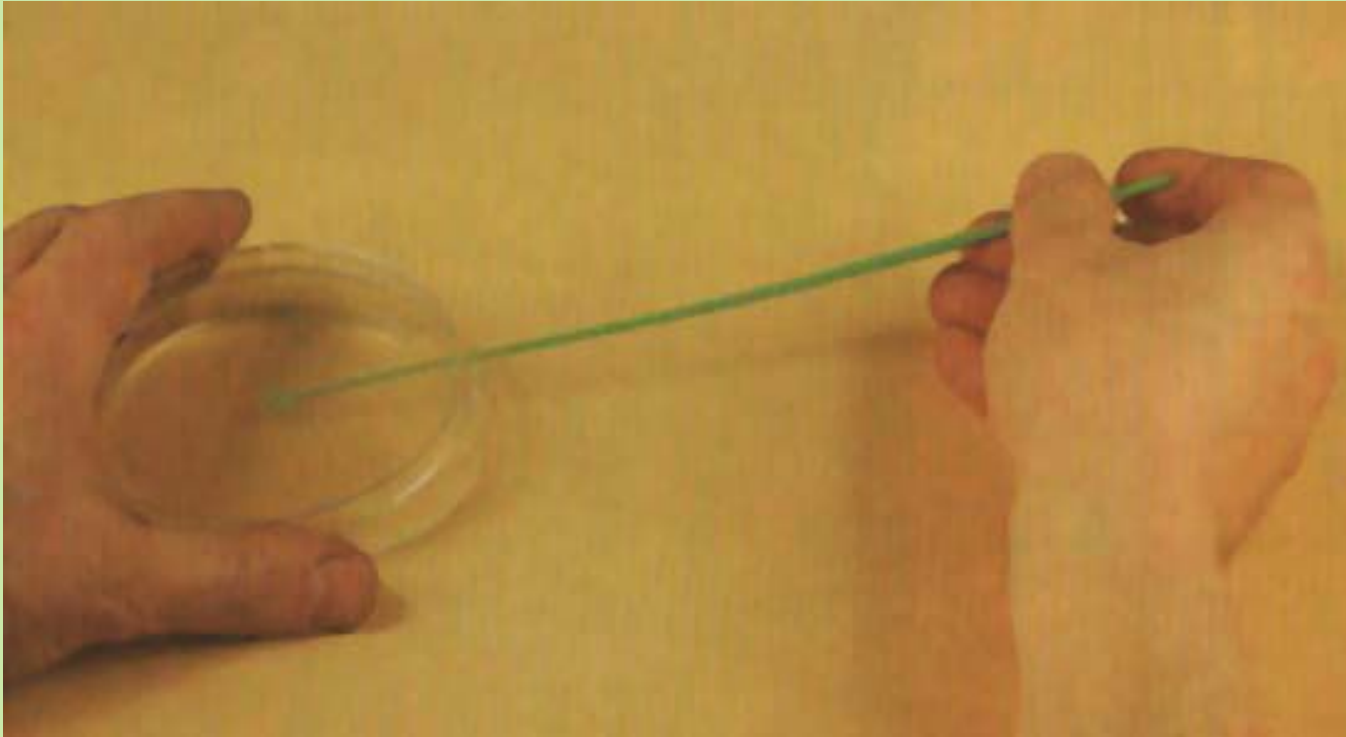

Методы выделения чистой культуры


- **Чистой культурой** называют такую культуру, которая содержит микроорганизмы одного вида. Выделение чистых культур бактерий - обязательный этап бактериологического исследования в лабораторной диагностике инфекционных болезней, в изучении микробной загрязненности различных объектов окружающей среды, и, в целом, при любой работе с микроорганизмами.
- Исследуемый материал (гной, мокрота, фекалии, кровь и другой материал от больных; вода, почва, воздух, пищевые продукты, трупы животных и человека, переносчики) обычно содержит ассоциации микробов.
- Выделение чистой культуры позволяет изучить морфологические, культуральные, биохимические, антигенные и другие признаки, по совокупности которых определяется видовая и типовая принадлежность возбудителя, то есть производится его идентификация.

Посев однократным истощающим штрихом

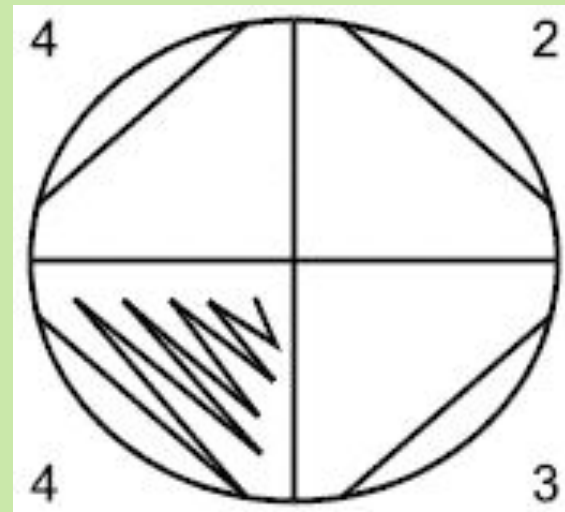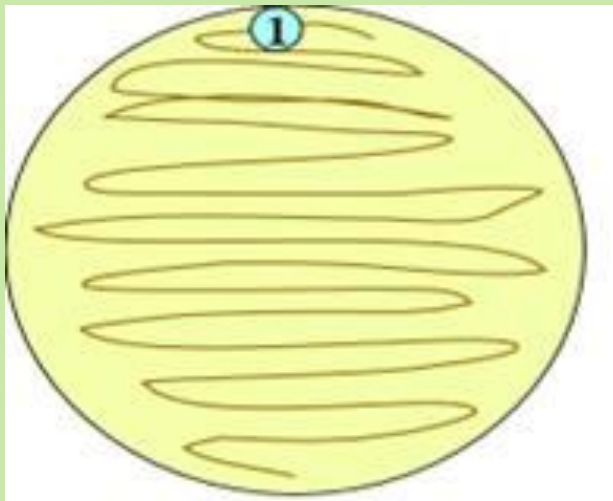


Посев по секторам

Посев истощающим штрихом секторами

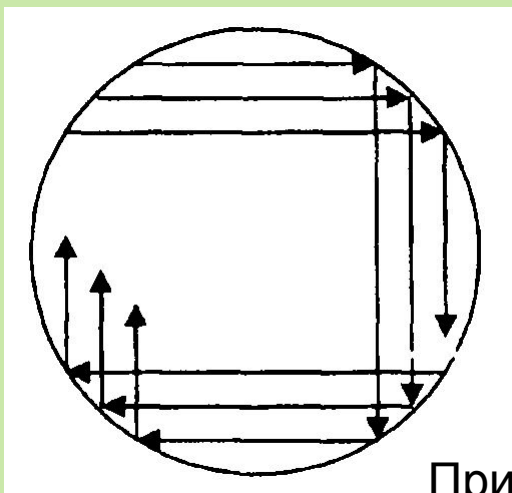

Применяют для
определения
микробного числа мочи

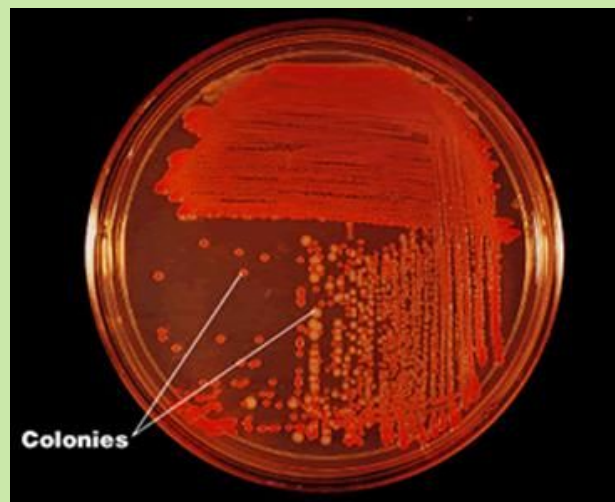


Учет результатов посева мочи секторным методом

A	I	II	III	К-во в 1 мл
1-6	-	-	-	<1000
8-20	-	-	-	3000
20-30	-	-	-	5000
30-60	-	-	-	10000
70-80	-	-	-	50000
100-150	5-10	-	-	100000
не сосч.	20-30	-	-	500000
-"-	40-60	-	-	1 млн.
-"-	100-150	10-20	-	5 млн.
-"-	не сосч.	30-40	-	10 млн.
-"-	-"-	60-80	ед.кол.	100 млн.

Посев на скошенный агар, метод Шукевича

- Посев на скошенный агар применяют для накопления и хранения чистой культуры бактерий
- Метод Шукевича - применяется для получения чистой культуры протей и других микроорганизмов обладающих «ползущим» ростом. Посев исследуемого материала производят в конденсационную воду у основания скошенного агара . Подвижные микроорганизмы (протей) способны подниматься вверх по скошенному агару , неподвижные формы остаются расти внизу на месте посева. Пересеивая верхние края культуры можно получить чистую культуру.

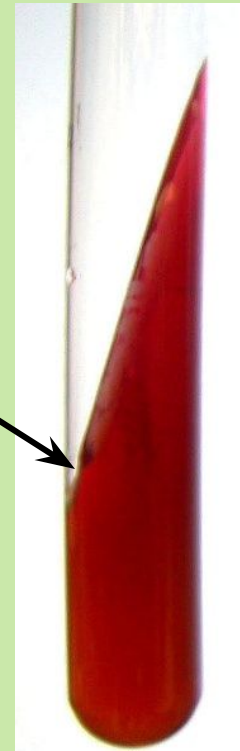

Место
посева
культуры
по Шукевичу



Посев
однократным
штрихом

Посев уколом



Рис. 56. Посев уколом.



Метод Дригальского

0,1мл материала вносят в первую чашку и стерильным стеклянным шпателем распределяют по поверхности среды. Затем этим же шпателем (не прожигая его в пламени горелки) делают такой же посев во второй и третьей чашках. С каждым посевом бактерий на шпателе остается все меньше и меньше и, при посеве на третью чашку, бактерии будут распределяться по поверхности питательной среды отдельно друг от друга. Через 1-7 сут выдерживания чашек в термостате (в зависимости от скорости роста микроорганизмов) на третьей чашке каждая бактерия дает клон клеток, образуя изолированную колонию, которую пересевают на скошенный агар с целью накопления чистой культуры.




Метод Коха (метод серийных разведений)

- последовательное разведение исследуемого материала в жидкой питательной среде до концентрации одной клетки в объеме

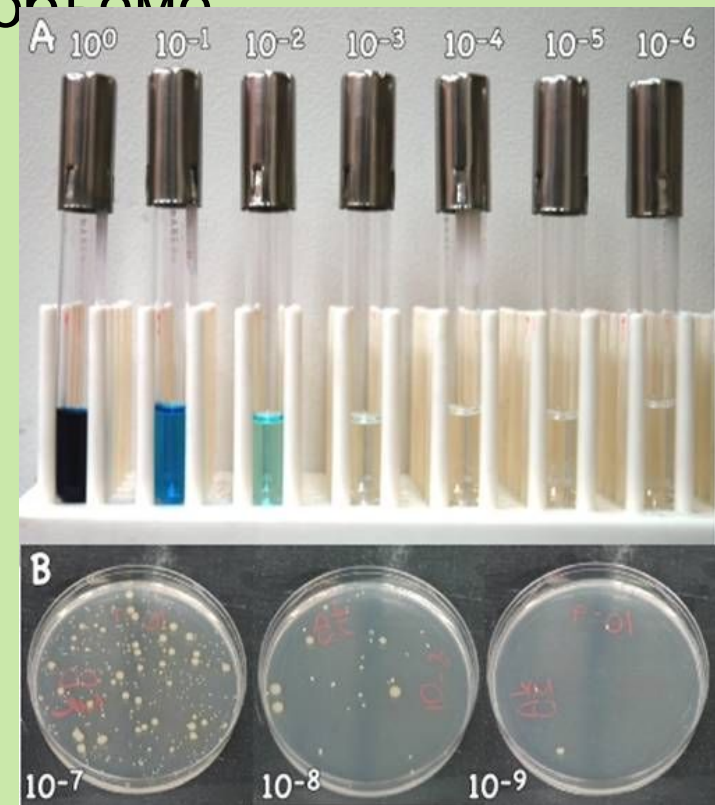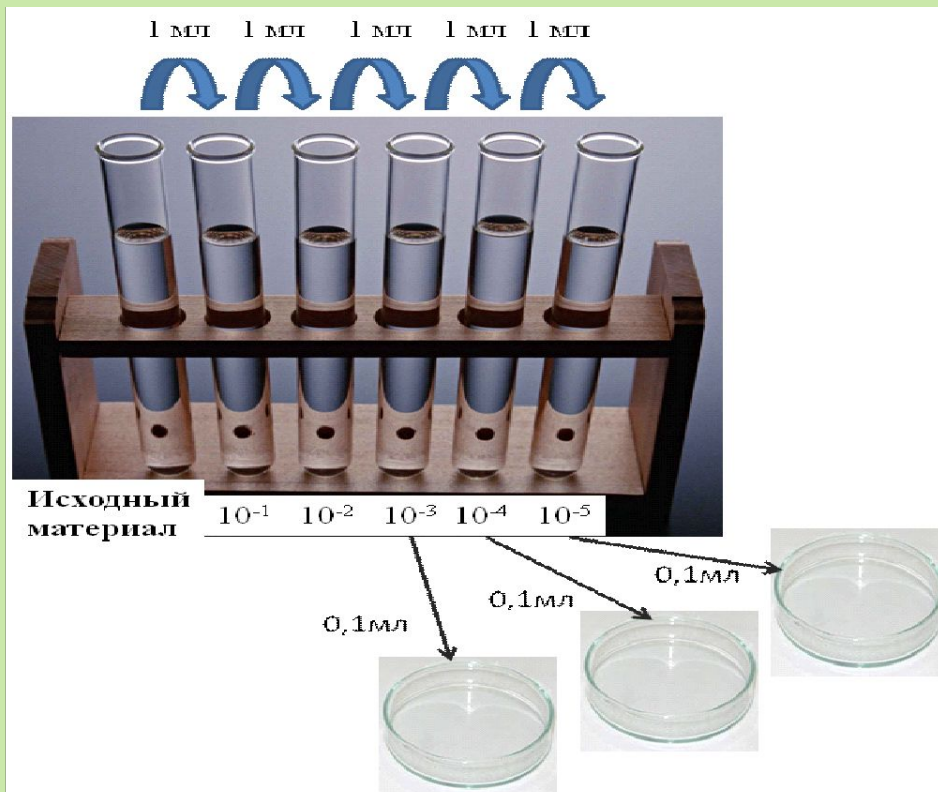

Метод мембранных фильтров

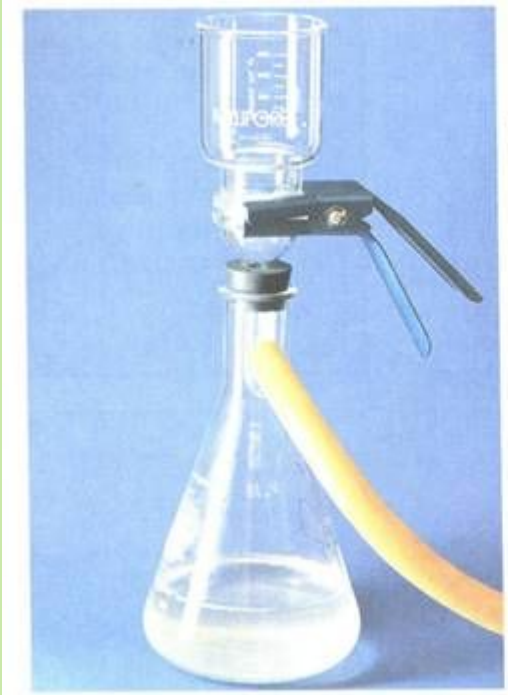

**Спасибо за
внимание!**