

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УО "ПИНСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

# ИССЛЕДОВАНИЕ СМЫСЛОВ С ПРЕДМЕТОВ ОБИХОДА

ПОДГОТОВИЛИ:

УЧАЩИЕСЯ 21 МД ГРУППЫ

СЕРЕДИЧ НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА

ШКРАБОВА ЕКАТЕРИНА

ВЛАДИМИРОВНА

ПРОВЕРИЛА:

ТАРАЧЁВА ЛЮБОВЬ ЕВГЕНЬЕВНА



**ПРИНЦИП МЕТОДА:**  
МЕТОД ОСНОВАН НА ИЗУЧЕНИИ  
СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ  
ЯЙЦАМИ ГЕЛЬМИНТОВ  
ПРЕДМЕТОВ ОБИХОДА И  
ИССЛЕДОВАНИИ ИХ  
ОБСЕМЕНЁННОСТИ.

ДЛЯ ЭТОГО СМЫВЫ БЕРУТ С:  
ПОСУДЫ, СКАТЕРТЕЙ, СТОЛОВ,  
МЕБЕЛИ, КОВРОВ, ЛИЧНОГО И  
ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ,  
ИГРУШЕК, ПОЛА, ДВЕРНЫХ  
РУЧЕК, А ТАКЖЕ С РУК.

**ОТБОР ПРОБ:**

**В КАЖДОМ  
ИССЛЕДУЕМОМ  
УЧРЕЖДЕНИИ БЕРУТ  
НЕ МЕНЕЕ 10-15  
ПРОБ.**

**ИССЛЕДОВАНИЕ  
СМЫВОВ С РУК  
ПЕРСОНАЛА  
ПРОВОДЯТ У  
КАЖДОГО  
ОТДЕЛЬНО.**



ПРИ ВЗЯТИИ ПРОБ НУЖНО СОБЛЮДАТЬ  
ОПРЕДЕЛЁННУЮ ОЧЕРЕДНОСТЬ:  
ПИЩЕБЛОК, СТОЛОВАЯ, ИГРОВАЯ,  
СПАЛЬНИ, УМЫВАЛЬНЫЕ, В  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ САНУЗЕЛ.

В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАННЫМ  
ПЕРЕЧНЕМ СМЫВЫ БЕРУТ В РАЗНЫХ  
ГРУППАХ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ,  
УЧИТЫВАЯ НАИБОЛЬШУЮ  
ПОРАЖЁННОСТЬ ДЕТЕЙ. ВО ВСЕХ  
ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРОБЫ  
ЖЕЛАТЕЛЬНО БРАТЬ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ РАЗ  
В ГОД.





СМЫВЫ С  
ПРЕДМЕТОВ  
ОБИХОДА БЕРУТ ПРИ  
ПОМОЩИ  
ДЕРЕВЯННЫХ  
ПАЛОЧЕК, КОНЕЦ  
КОТОРЫХ ОБЁРНУТ  
КАПРОНОВОЙ  
ТКАНЬЮ. В  
ЦЕНТРИФУЖНЫЕ  
ПРОБИРКИ  
НАЛИВАЮТ ДО  
ПОЛОВИНЫ ОБЪЁМА  
2% РАСТВОР  
ПИТЬЕВОЙ СОДЫ.


СМОЧЕННЫЕ В ЭТОЙ ЖИДКОСТИ  
ПАЛОЧКИ ПРОВОДЯТ  
МНОГОКРАТНО ПО  
ИССЛЕДУЕМОМУ ПРЕДМЕТУ, НА  
ПЛОЩАДИ НЕ МЕНЕЕ 0,25-0,5  
М2, А ТАКЖЕ С РУК, ПАЛЬЦЕВ,  
МЕЖПАЛЬЦЕВЫХ, ПОДНОГТЕВЫХ  
ПРОСТРАНСТВ, ПОМЕЩАЮТ ИХ В  
ТЕ ЖЕ ПРОБИРКИ ДОСТАВЛЯЮТ  
В ЛАБОРАТОРИЮ.

# ХОД ИССЛЕДОВА- НИЯ:

В ЛАБОРАТОРИИ  
ПАЛОЧКИ  
ПРОПОЛАСКИ-  
ВАЮТ ТЕМ ЖЕ  
РАСТВОРОМ,  
СМЫВНУЮ  
ЖИДКОСТЬ  
ЦЕНТРИФУГИ-  
РУЮТ





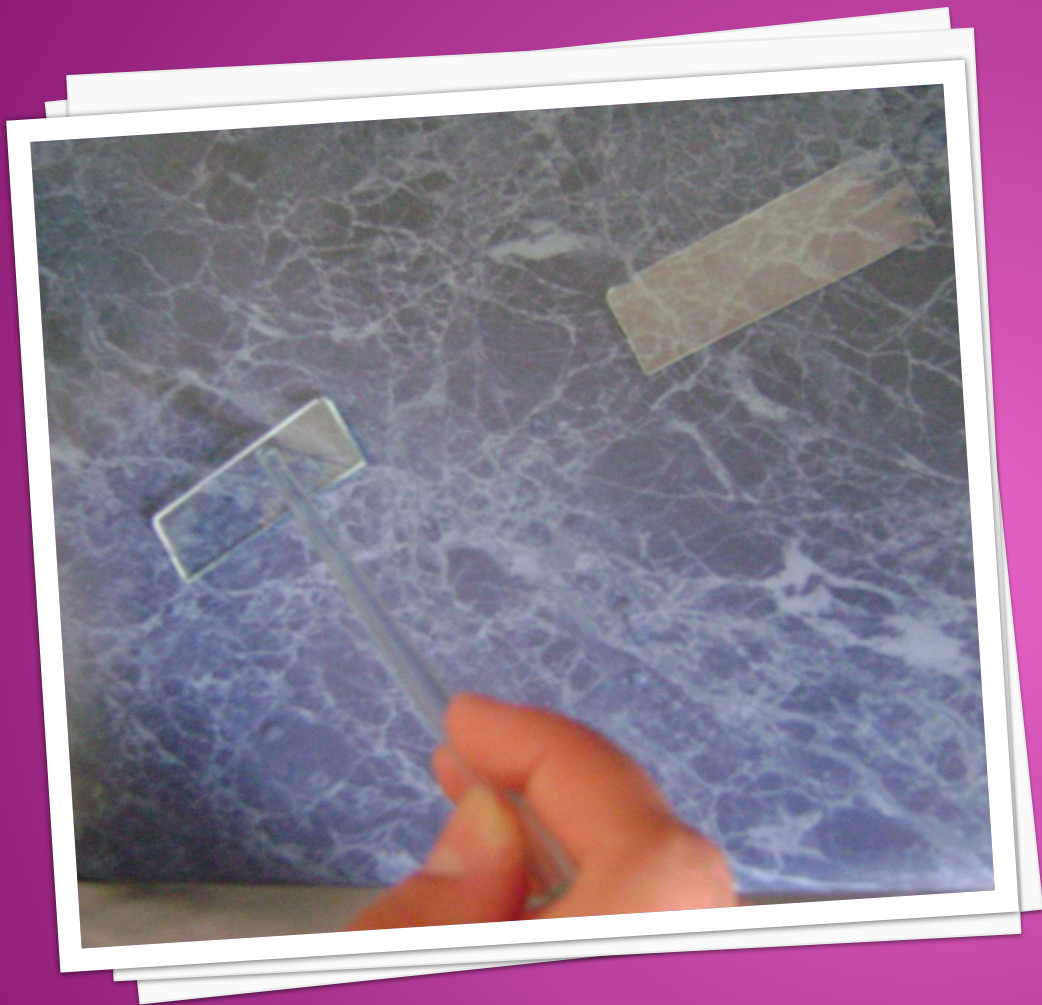

ПОСЛЕ  
ЦЕНТРИФУГИ-  
РОВАНИЯ  
ПОЛУЧЕННЫЙ  
ОСАДОК  
ПЕРЕНОСЯТ НА  
ПРЕДМЕТНОЕ  
СТЕКЛО





И В ПОСЛЕДНЮЮ  
ОЧЕРЕДЬ  
ПЕРЕНЕСЁННЫЙ  
НА ПРЕДМЕТНОЕ  
СТЕКЛО ОСАДОК  
МИКРОСКО-  
ПИРУЮТ  
(ОБЪЕКТИВЫ 10X,  
40X,  
ОКУЛЯРЫ 10X,  
15X)