

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УО "ПИНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

ИССЛЕДОВАНИЕ СМЫСЛОВ С ПРЕДМЕТОВ ОБИХОДА

ПОДГОТОВИЛИ:

УЧАЩИЕСЯ 21 МД ГРУППЫ
СЕРЕДИЧ НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА
ШКРАБОВА ЕКАТЕРИНА

ВЛАДИМИРОВНА

ПРОВЕРИЛА:

ТАРАЧЁВА ЛЮБОВЬ ЕВГЕНЬЕВНА



ПРИНЦИП МЕТОДА:
МЕТОД ОСНОВАН НА ИЗУЧЕНИИ
СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ЯЙЦАМИ ГЕЛЬМИНТОВ
ПРЕДМЕТОВ ОБИХОДА И
ИССЛЕДОВАНИИ ИХ
ОБСЕМЕНЁННОСТИ.

ДЛЯ ЭТОГО СМЫВЫ БЕРУТ С:
ПОСУДЫ, СКАТЕРТЕЙ, СТОЛОВ,
МЕБЕЛИ, КОВРОВ, ЛИЧНОГО И
ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ,
ИГРУШЕК, ПОЛА, ДВЕРНЫХ
РУЧЕК, А ТАКЖЕ С РУК.

ОТБОР ПРОБ:

**В КАЖДОМ
ИССЛЕДУЕМОМ
УЧРЕЖДЕНИИ БЕРУТ
НЕ МЕНЕЕ 10-15
ПРОБ.**

**ИССЛЕДОВАНИЕ
СМЫВОВ С РУК
ПЕРСОНАЛА
ПРОВОДЯТ У
КАЖДОГО
ОТДЕЛЬНО.**



ПРИ ВЗЯТИИ ПРОБ НУЖНО СОБЛЮДАТЬ
ОПРЕДЕЛЁННУЮ ОЧЕРЕДНОСТЬ:
ПИЩЕБЛОК, СТОЛОВАЯ, ИГРОВАЯ,
СПАЛЬНИ, УМЫВАЛЬНЫЕ, В
ЗАКЛЮЧЕНИЕ САНУЗЕЛ.

В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАННЫМ
ПЕРЕЧНЕМ СМЫВЫ БЕРУТ В РАЗНЫХ
ГРУППАХ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
УЧИТЫВАЯ НАИБОЛЬШУЮ
ПОРАЖЁННОСТЬ ДЕТЕЙ. ВО ВСЕХ
ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРОБЫ
ЖЕЛАТЕЛЬНО БРАТЬ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ РАЗ
В ГОД.




СМЫВЫ С
ПРЕДМЕТОВ
ОБИХОДА БЕРУТ ПРИ
ПОМОЩИ
ДЕРЕВЯННЫХ
ПАЛОЧЕК, КОНЕЦ
КОТОРЫХ ОБЁРНУТ
КАПРОНОВОЙ
ТКАНЬЮ. В
ЦЕНТРИФУЖНЫЕ
ПРОБИРКИ
НАЛИВАЮТ ДО
ПОЛОВИНЫ ОБЪЁМА
2% РАСТВОР
ПИТЬЕВОЙ СОДЫ.

СМОЧЕННЫЕ В ЭТОЙ ЖИДКОСТИ
ПАЛОЧКИ ПРОВОДЯТ
МНОГОКРАТНО ПО
ИССЛЕДУЕМОМУ ПРЕДМЕТУ, НА
ПЛОЩАДИ НЕ МЕНЕЕ 0,25-0,5
М2, А ТАКЖЕ С РУК, ПАЛЬЦЕВ,
МЕЖПАЛЬЦЕВЫХ, ПОДНОГТЕВЫХ
ПРОСТРАНСТВ, ПОМЕЩАЮТ ИХ В
ТЕ ЖЕ ПРОБИРКИ ДОСТАВЛЯЮТ
В ЛАБОРАТОРИЮ.

ХОД ИССЛЕДОВА- НИЯ:

В ЛАБОРАТОРИИ
ПАЛОЧКИ
ПРОПОЛАСКИ-
ВАЮТ ТЕМ ЖЕ
РАСТВОРОМ,
СМЫВНУЮ
ЖИДКОСТЬ
ЦЕНТРИФУГИ-
РУЮТ



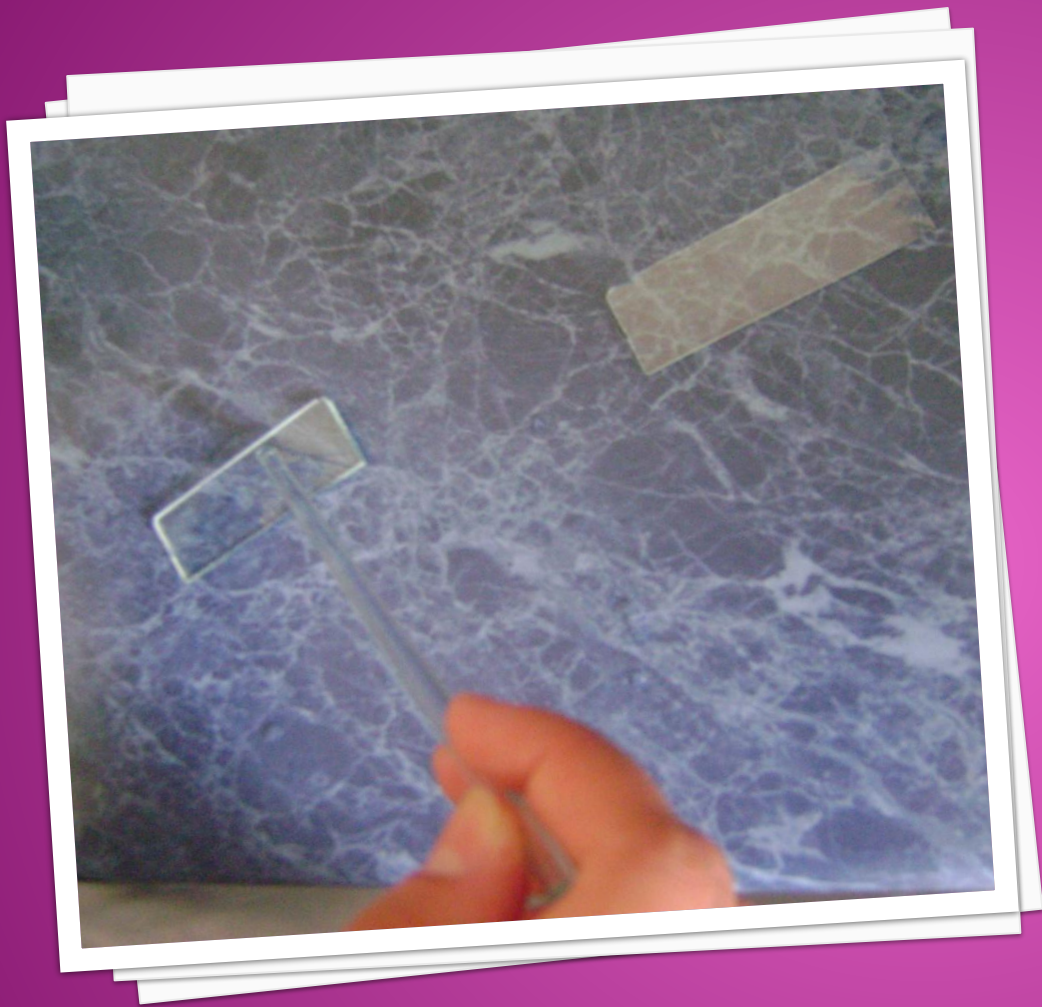

ПОСЛЕ
ЦЕНТРИФУГИ-
РОВАНИЯ
ПОЛУЧЕННЫЙ
ОСАДОК
ПЕРЕНОСЯТ НА
ПРЕДМЕТНОЕ
СТЕКЛО



И В ПОСЛЕДНЮЮ
ОЧЕРЕДЬ
ПЕРЕНЕСЁННЫЙ
НА ПРЕДМЕТНОЕ
СТЕКЛО ОСАДОК
МИКРОСКО-
ПИРУЮТ
(ОБЪЕКТИВЫ 10X,
40X,
ОКУЛЯРЫ 10X,
15X)